

NETTI PERSONNALISÉ PRODUIT

INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE SOLUTION
INDIVIDUELLE ADAPTÉE

Y COMPRIS L'UTILISATION PAR LES TRANSPORTS



Conçu en Norvège

Enable joy of life

FELICITATION !

Vous êtes maintenant propriétaire d'un produit Netti avancé personnalisé.

Ce produit est fait sur mesure, **SPÉCIALEMENT POUR VOUS** – pour correspondre le mieux possible à vos besoins. Si vous prenez correctement soin de ce fauteuil et si vous l'utilisez conformément à l'usage prévu, vous serez récompensé par de nombreuses années de service fiable.

■ Veuillez prendre quelques minutes pour lire cette introduction aux produits Netti personnalisés. Vous y trouverez des informations sur les conditions d'utilisation du fauteuil et sur les conditions de garantie.

Votre produit Netti personnalisé est mis au point et conçu selon vos besoins sur la base des informations de votre médecin. Notre équipe de fabricants spécialisés de fauteuils s'appuie sur ces informations.

Ces solutions sont développées sur la base de principes de construction bien. Ces produits sont fabriqués à l'aide de pièces que notre équipe adapte pour concevoir ce produit personnalisé. Les solutions uniques telles que nous les livrons ont subi un test d'évaluation des risques et leurs caractéristiques de résistance et de fonctionnalités ont été approuvés par rapport à leur pertinence pour ce produit – pour vous donner un produit sûr d'utilisation et fiable.

LABEL CE

Les produits Netti personnalisés ne sont pas étiquetés CE, car ce ne sont pas des produits fabriqués en série. Ils sont néanmoins fabriqués sur la base d'une longue expérience et d'un long savoir-faire et satisferont à toute utilisation ordinaire.

DIRECTIVES D'UTILISATION



- Prenez votre temps pour étudier les informations d'utilisation fournies avec votre produit Netti personnalisé. C'est essentiel pour obtenir le meilleur de votre produit.
- Si vous avez un fauteuil Netti personnalisé, veuillez étudier le manuel du fauteuil de base qui a été personnalisé – pour apprendre comment utiliser et entretenir votre fauteuil personnalisé.
- Si votre produit Netti personnalisé est la pièce d'un fauteuil, assurez-vous qu'il est installé et fixé correctement. Vérifiez régulièrement les fixations pour vous assurer qu'elles restent bien en place.
- Pour ce qui est des produits rembourrés Netti personnalisé, veuillez suivre les instructions de nettoyage mentionnées sur l'étiquette.
- Si le produit Netti personnalisé a des pièces amovibles, n'oubliez pas de les lubrifier régulièrement pour qu'elles fonctionnent parfaitement.

Assurez-vous que votre revendeur vous a bien remis les informations relatives à votre produit et à la formation nécessaire pour l'utiliser. Il est responsable de votre formation et des informations relatives aux risques et aux mesures de précaution spéciales à prendre avec votre produit Netti personnalisé..

TEST DE CHOC

Tous les fauteuils Netti ayant réussi un test de choc ont été testés avec l'équipement Netti standard et sont approuvés pour une utilisation comme siège à bord d'un véhicule.

Les produits Netti personnalisés N'ONT PAS subi de test de choc. Les fauteuils équipés de pièces Netti personnalisées ne sont donc PAS APPROUVÉS pour une utilisation comme siège dans un véhicule.



Les pièces personnalisées portent l'étiquette ci-contre :

Dans certains cas spéciaux, un fauteuil personnalisé peut avoir subi une évaluation relative au risque et à sa résistance pour être utilisé comme siège dans un véhicule. Vous devez en faire la demande auprès de votre revendeur Alu Rehab.

UTILISATION COMME SIÈGE À BORD D'UN VÉHICULE

Si vous voulez utiliser un fauteuil Netti (ayant subi un test de choc standard et ayant été approuvé pour une utilisation comme siège dans un véhicule) sur lequel sont montées des pièces Netti personnalisées – comme siège dans un véhicule, vous pouvez le faire si vous remplacez les pièces personnalisées par des pièces standard pour cet usage provisoire ; par exemple, l'appui-tête ou les repose-jambes. Prenez soin de bien monter ces pièces conformément à la description de montage du manuel d'utilisateur.

TRANSPORT EN VOITURE :

Lorsqu'un fauteuil est utilisé comme siège dans une voiture, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Vérifiez que le fauteuil est approuvé pour être utilisé comme siège dans une voiture (selon ISO 7176-19:2008)
- Vérifiez le poids max. de l'utilisateur et ne chargez pas plus le fauteuil
- Retirez tous les accessoires et toutes les pièces qui risquent de se détacher en cas d'accident. Stockez-les en lieu sûr.
- Utilisez toujours un fauteuil approuvé et un système de retenue pour occupant (ISO 10452:2012) pour fixer le fauteuil dans le véhicule. Netti III a réussi l'essai de choc pour fauteuil roulant combiné avec système de retenue pour occupant W120/DISR développé par Unwin Safety Systems. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.unwin-safety.com.
- Vérifiez que le fauteuil est équipé « d'anneaux d'ancrage » montage pour le de sangles de fixation à l'arrière.

Référence d'une paire d'anneaux d'ancrage avec douille : 21074



SÉCURISATION DU FAUTEUIL




À l'avant : utilisez un crochet ou une fixation à sangle.


Deux autocollants à l'avant du cadre montrent l'endroit où fixer les sangles à l'avant.

À l'arrière : Montez un « anneau d'ancrage » dans l'un des trous du support de roue. Accrochez un mousqueton dans l'« anneau d'ancrage ».

L'angle formé par les sangles doit être de 0 à 45°

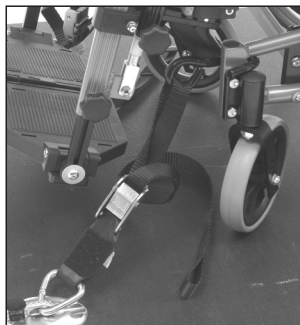

⚠ Utilisez toujours les systèmes de retenue pour occupant de la voiture pour sécuriser l'utilisateur de fauteuil roulant. Les harnais de correction utilisés dans un fauteuil roulant ne sont pas des ceintures de sécurité. Assurez-vous que les ceintures de sécurité sont près du corps de l'utilisateur (et qu'elles ne passent pas au-dessus de l'accoudoir).

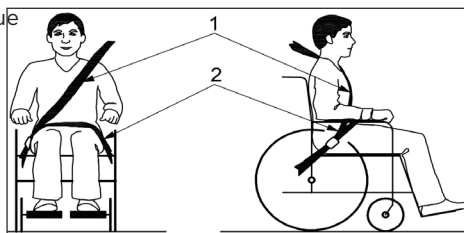

⚠ Les fauteuils roulants Netti ont été soumis à des essais de choc sans dispositif de motorisation, etc. Les fauteuils Netti ont été testés sans dispositif de motorisation, etc. Si un dispositif de motorisation, un monte-escalier, etc. est monté ultérieurement, il est nécessaire de vérifier si le dispositif a été testé à l'essai de choc et approuvé pour une utilisation dans un véhicule. Si ce n'est pas le cas, il convient de démonter ce dispositif lorsque le fauteuil est utilisé comme siège dans un véhicule.

⚠ Si l'utilisateur mesure 1,85 m ou plus et que vous utilisez Netti III comme siège dans un véhicule, le kit d'extension du dossier doit être monté.

⚠ Si la largeur du fauteuil dépasse la largeur maximale de 700 mm spécifiée dans le PRM-TSI, ceci peut avoir un impact sur la possibilité d'utiliser le fauteuil dans le train et autres transports publics.

⚠ Les fauteuils Netti ont réussi les essais de choc et ont été approuvés avec les coussins Netti. Utilisez toujours les coussins Netti lorsque le fauteuil est utilisé comme siège dans un véhicule.

⚠ Si un appui-tête est monté correctement, il est très stable, mais un appui-tête de véhicule est conçu pour des charges encore plus lourdes.

⚠ N'utilisez jamais un fauteuil roulant comme assise dans un véhicule s'il a été impliqué dans un accident avec impact.

PLIAGE POUR LE TRANSPORT

Lorsque le fauteuil roulant n'est pas utilisé, pliez-le comme le décrit le manuel d'utilisation. Mettez le fauteuil dans le coffre ou sur le siège arrière. S'il est placé sur le siège arrière, fixez la cadre à l'aide des ceintures de sécurité pour vous assurer qu'il ne représente aucun danger pour les passagers en cas d'accident.

Le fauteuil Netti manuel peut être transporté dans un avion, sans aucune restriction. Le fauteuil Netti est équipé d'1 ou de 2 vérins à gaz. Mais ils ne sont pas classifiés comme matières dangereuses. Contrairement à l'instruction générale sur les matières dangereuses UN3164, la directive IATA-DGR (réglementation spéciale A114) stipule que les produits qui contiennent du gaz et qui sont prévus pour fonctionner comme amortisseurs (notamment les dispositifs absorbant l'énergie et les ressorts pneumatiques) NE SONT PAS soumis aux instructions sur le transport, en d'autres termes, ils ne sont pas soumis aux réglementations suivantes :

- a) Chaque article contient moins de 1,6 l de gaz et sa pression de précharge est inférieure à 250 bars, le produit de la capacité exprimée en litres et de la pression de précharge exprimée en bars étant inférieur à 80.
- b) chaque article a un pression d'éclatement minimale 4 fois supérieure à la pression de charge à + 20 °C pour les produits n'excédant pas un volume gazeux de 0,5 l.
- c) chaque article est constitué de matériaux qui ne se fragmentent pas.
- d) chaque article a été fabriqué en conformité avec le standard de qualité approuvé par les autorités responsables du pays de fabrication.
- e) il est prouvé et démontré que l'article relâche sa pression au moyen d'un joint dégradable au feu ou un autre dispositif de relâchement de pression de telle sorte que l'article ne se fragmente pas et qu'il n'est pas propulsé.

VOYAGE EN TRANSPORTS PUBLICS

Le fauteuil roulant doit être placé dans la zone spéciale réservée aux fauteuils roulants. Il doit être installé de dos par rapport au sens du voyage. Le dossier du fauteuil roulant doit être positionné contre un objet fixe tel qu'une rangée de sièges ou une cloison. Veillez à ce que l'utilisateur puisse accéder aisément aux mains courantes et poignées.

GARANTIE

Alu Rehab assure une garantie réparation de 2 ans pour les produits Netti personnalisés.

Les solutions personnalisées Netti sont uniques et ne sont pas fabriquées en série. Pour cette raison, vous devrez toujours retourner le produit personnalisé Netti à Alu Rehab s'il nécessite une réparation ou un remplacement.

Alu Rehab décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation et/ou de réparations inappropriées ou non professionnelles, d'une négligence, de l'usure, de modifications apportées aux équipements du fauteuil non approuvées par Alu Rehab ou de l'utilisation de pièces de rechange fournies ou fabriquées par des tiers. Les cas précités annulent toute garantie.

RÉCLAMATION

- Toute réclamation doit être adressée au revendeur du produit personnalisé Netti ou du fauteuil personnalisé Netti. Il est à noter que les documents de vente doivent être correctement complétés et signés pour prouver la date et le lieu d'achat du produit Netti personnalisé en question.
 - Un produit Netti personnalisé porte une étiquette avec un numéro d'identification NeC unique. En cas de questions sur le produit, veuillez indiquer ce numéro ou le numéro du châssis du fauteuil ou le numéro de commande.
 - Les réclamations doivent être adressées au revendeur qui vous a vendu le fauteuil roulant dès que le défaut est constaté.
 - L'agent de vente et Alu Rehab décideront si le défaut est couvert par la garantie. Le plaignant sera informé le plus tôt possible de cette décision.
 - Si la plainte est acceptée, il appartient au vendeur et à Alu Rehab de décider si le produit doit être réparé ou remplacé ou si le client doit bénéficier d'une remise suite au défaut.
- ! L'usure ordinaire, une utilisation incorrecte ou une mauvaise manœuvre ne peuvent pas donner lieu à réclamation.**
- ! L'utilisateur doit utiliser, entretenir et manœuvrer le fauteuil roulant tel que le décrit le manuel d'utilisateur s'il souhaite voir aboutir ses réclamations.**

C'EST PAR LE DIALOGUE QUE NOUS
CRÉONS DES SOLUTIONS SIMPLES ET
AMÉLIORONS LA QUALITÉ DE VIVRE

**NOUS VOUS SOUHAITONS DE NOMBREUSES ANNÉES
DE CONFORT AVEC VOTRE PRODUIT PERSONNALISÉ
NETTI**

Vous trouverez les mises à jour, les manuels
d'utilisation et les informations sur nos pro-
duits standards sur notre page internet :

www.My-Netti.fr

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

**UM0123 FR
2018-12**



FABRICANT:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NORWAY

T: +47 51 78 62 20
post@My-Netti.com

DISTRIBUTEUR :

Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
DENMARK

T: +45 87 88 73 00
info@My-Netti.com

Alu Rehab ApS
189, Route des Pontets
PAE les Pontets
74320 Sevrier

Tél. : +04 50 27 37 63
Fax : +04 50 60 51 80
info@My-Netti.fr

My-Netti.fr