



Netti[®] *Side support Stabil*

Mounting Description - uk

Montageanleitung - de

Monteringsanvisning - se



*inspire
joy of life*

NETTI SIDE SUPPORT STABILE (UK)

MOUNTING DESCRIPTION

Netti side support Stabile is developed to mainly give extra stability to Netti back cushions - with side supports. It can also be used separately.

Netti side support Stabile is mounted to the wheelchair chair-back profiles and is height and angle adjustable. It can be swung aside to make access to the user more convenient.



Item	Item number
Side support Stabile Left	26830
Side support Stabile Right	26843

MOUNTING

Netti side support Stabile is prepared for mounting to round and square backrest tubes. The black enclosed plastic bushing is used when mounting to square backrest tubes.



6 mm Allen key and a sharp knife

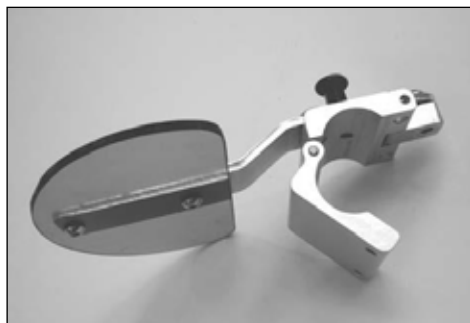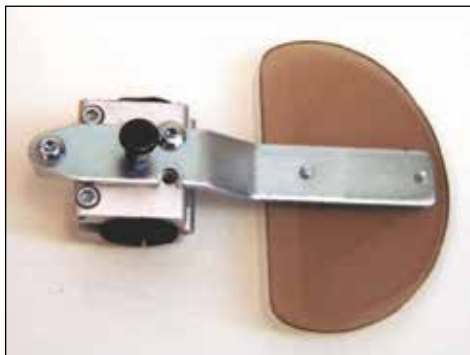

The Netti Side supports Stabile can be fitted with a cover.

- Open the Velcro on the cover
- Pull it over the side support plastic plate
- Fix it with the Velcro



After fitting the backrest cushion;

- Find the correct height for the side support. The support should be parallel with the integrated side support of the backrest cushion.
- If the Velcro back has a cut-out for the side support, place the side support there.
- If there is no opening in the Velcro back, cut a piece of the Velcro backrest to give room for the clamp to fit around the backrest tube at desired height.
- When mounting on a square tube, place the enclosed plastic bushing around the backrest tube before fixing the clamp around the tubing.
- Mount the clamp and tighten the 6 mm screws firmly.



Before the screws are tightened, you can choose the angle of the clamp and thereby increase or decrease the stability.



To release the side support and swing it outward, pull the release button out.



NETTI SEITENPELOTTE STABIL (DE)

MONTAGEANLEITUNG

Netti Seitenstütze Stabil wurde entwickelt, um hauptsächlich Netti Rückenkissen mit Seitenstützen - zusätzliche Stabilität zu verleihen. Es kann auch separat verwendet werden.

Die Netti Seitenstütze Stabil wird an den Rückenlehnenprofilen des Rollstuhls montiert und ist höhen- und winkelverstellbar. Es kann zur Seite geschwenkt werden, um den Zutritt für den Benutzer bequemer zu machen.

Artikel	Artikelnummer
Seitenpelotte Stabil Links	26830
Seitenpelotte Stabil Rechts	26843

MONTAGE



- Entfernen Sie die zwei 6mm Inbusschrauben aus dem Klemmadapter und klappen Sie den Adapter auf.
- Wird die Seitenpelotte Stabil auf einem viereckigen Rückenrohr montiert, verwenden Sie bitte das beigefügte Plastikadapterstück



6 mm Inbusschraube, Cuttermesser

Netti Seitenpelotte Stabil kann mit einen Bezug ausgestattet werden.

- Öffne den Klettverschluss
- Ziehe den Bezug über die Plastikplatte
- Schließen Sie den Klettverschluss wieder.

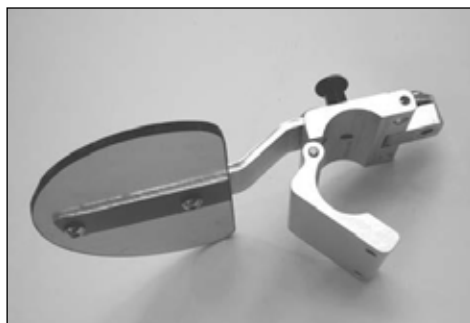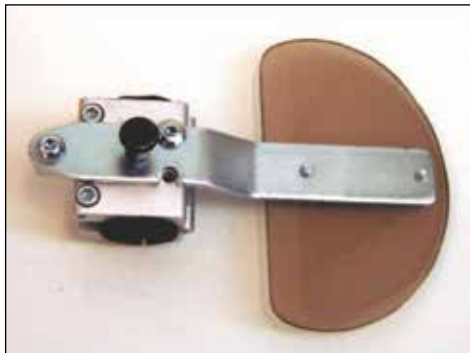

Nachdem Sie das Rückenkissen an den Benutzer angepasst haben (optimale Höhe – Lendenbereich beachten), platzieren Sie die Seitenpelotte Stabil auf das Rückenrohr.

Die Unterstützung sollte parallel mit der integrierten Seitenunterstützung des Rückenlehnenkissens sein.

Bei Bedarf schneiden Sie ein Stückchen Rückenbespannung weg, damit Sie den Klemmadapter am Rückenrohr fixieren können.


Bei einem viereckigen Rückenrohr legen Sie zuerst das Plastikadapterstück um das Rückenrohr

Den Klemmadapter um das Plastikadapterstück herumlegen, zuklappen und mit den 6mm Schrauben lose fixieren.



Bevor Sie die Schrauben festziehen, können Sie den Winkel des Klemmadapters bestimmen, um mehr oder weniger Stabilität auf das Rückenkissen zu setzen.

Um die Seitenpelotte nach außen zu schwenken, ziehen Sie den Auslöseknopf nach außen und heben Sie die Pelotte nach oben an.

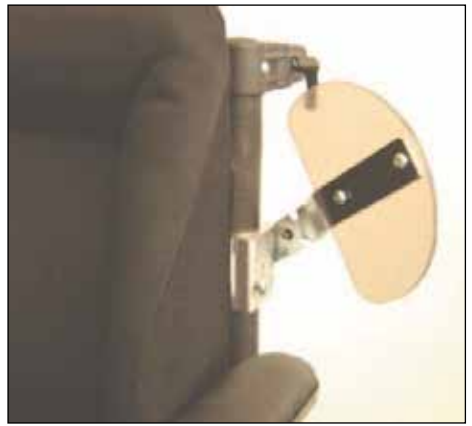

NETTI SIDOSTÖD STABIL (SE)

MONTERINGSANVISNING

Netti Sidostöd Stabil är ett bålstöd som främst används för att ge extra stöd till Netti ryggdynor. Det kan även användas separat.

Netti sidostöd Stabile monteras på rullstolens ryggstödsprofiler och är justerbar i höjd och vinkel. Den kan svängas åt sidan för att göra åtkomsten till användaren mer bekväm.

Artikel
Sidostöd Stabil Vinster
Sidostöd Stabil Högre



Artikelnummer
26830
26843

MONTERING

Netti Sidostöd Stabil är förberedd för montering på runda och fyrkantiga ryggrör. Den svarta slutna plastbussningen används vid montering på fyrkantiga ryggrör.



6 mm sexkantnyckel och en skarp kniv

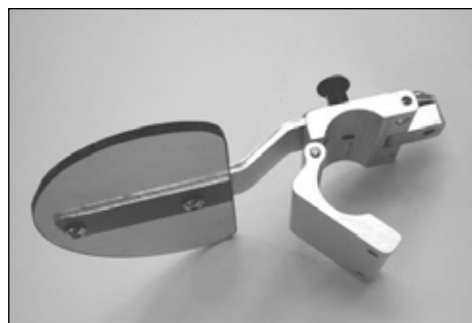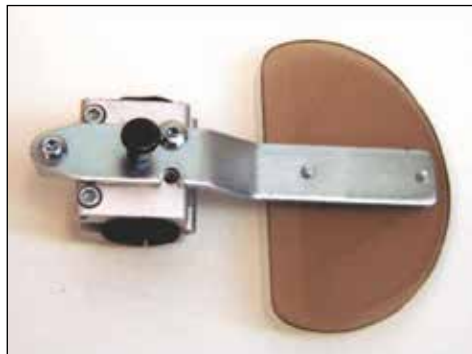

Montering överdrag

- Dra överdraget över plastplattan och
- fäst den med kardborren.




Efter montering av ryggstödsdynan:

- Hitta rätt höjd för sidostödet. Stödet ska vara parallellt med det integrerade sidostödet på ryggdynan.
- Om kardborreryggen har ett uttag för sidostödet, placera sidostödet där.
- Om det inte finns någon öppning i kardborreryggen, skär en bit av kardborreryggstödet för att ge plats åt klämman att passa runt ryggstödsröret i önskad höjd.
- Vid montering på ett fyrkantsrör, placera den medsända plastbussningen runt ryggstödsröret innan du fäster klämman runt röret.
- Montera klämman och dra åt 6 mm skruvarna ordentligt.

Innan skruvarna dras åt kan du välja vinkel på klämman och därigenom öka eller minska stabiliteten.

FÖR ATT SLÄPPA PÅ SIDOSTÖDET

- Dra i spärren och vrid bort sidostödet.

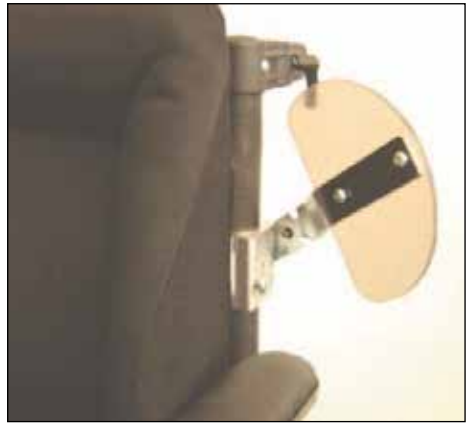

Manufacturer:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

✉ post@My-Netti.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distributor

📍 Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Denmark

✉ info@my-netti.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distributor

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Germany

✉ info@my-netti.com
T: +49 5733 922 311
F: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distributor

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Poland

✉ biuro@mdh.pl
T: +48 42 674 83 84
my-netti.com
