

# Den gode siddestilling

Positionering | Stabilitet | Variation | Hudbeskyttelse



Our brands

---

 **TA**<sup>®</sup>

 **Netti**<sup>®</sup>

 **MEYRA**<sup>®</sup>

 **MEYRA**<sup>®</sup>  
GROUP

# Meyra Groups stærke brands inspirerer til livsglæde

Med sammenlægningen af TA Service, Netti by Alu Rehab og Meyra til ét samlet Meyra Group tilbyder vi kørestole til stort set ethvert behov.

Vi har kørestole til den aktive bruger, til ham eller hende, som har brug for en eldrevet stol og dem, som ikke selv kan ændre deres siddestilling. Vores fokus er at tilbyde kørestole, hvor brugeren kan sidde godt - mange timer hver dag - uanset behov.

Vi ønsker at bidrage til forbedring af sundhedsplejen gennem gode, økonomiske og helhedsorienterede løsninger, som skaber livsglæde for brugerne. Med kørestole fra TA, Netti og Meyra tilbyder vi innovative og pålidelige produkter, der optimerer dagligdagen for brugerne, så de kan være mobile og deltage i hverdagens aktiviteter - og har de bedste forudsætninger for at bevare et godt helbred.

*inspire  
joy of life*



# Positionering • Stabilitet Variation • Hudbeskyttelse

- en forudsætning for den gode siddestilling

**Når vi skal finde den gode løsning til vores kørestolsbrugere, er slutmålet at sikre, at brugeren får optimeret sin ADL (activities of daily living), kan være aktiv, tage del i det sociale liv og forblive sund og rask.**

For at kunne hjælpe med dette, må vi som professionelle sørge for at brugeren får en kørestol, som han eller hun vil kunne sidde godt i over tid. Det sikres ved at have fokus på den rette positionering, en god stabilitet så den gode siddestilling bevares, mulighed for variation og dermed trykaflastning samt beskyttelse af huden, så trykskader undgås.





Ligesom Eskil Rønningsbakken har brug for den rette positionering, stabilitet, variation og beskyttelse af sin hud for at kunne udføre denne balanceøvelse, har vores kørestolsbrugere glæde af, at vi fokuserer på disse elementer. De er forudsætningen for at kunne bevare et godt helbred og være i stand til at deltage i hverdagens aktiviteter – og nyde livet.

# Vælg den rette kørestol med udgangspunkt i brugerens situation

Når man skal vælge den rette kørestol, kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i brugerens sygdomsbillede. Det kan give en indikation af, hvilken stol man skal starte med at kigge på. Vi har her lavet en oversigt, som du kan bruge - men tag gerne fat i os for vurdering af den enkelte brugers behov.

	Netti III / III HD	Netti S	Netti Dynamic III HD	Netti XHD	TA IQ FWD	TA IQ MWD	TA Indoor-Wave	TA IQ FWD Stand-Up	Meyra iCHAIR MC3	Meyra Optimus 2	Meyra iCHAIR XXL
Reduceret mobilitet	●	●		●	●	●	●			●	●
Hemiplegi	●			●	●	●	●	●			
Multiple sklerose	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
ALS	●			●	●	●	●	●			
Huntington sygdom	●		●	●							
Cerebral parese	●	●*	●	●	●	●	●	●		●	
Tetraplegi	●	●*	●	●	●	●	●	●			
Brug for holdere til medicinsk udstyr	●	●	●	●							
Parkinsons sygdom	●		●		●	●	●		●	●	●
SMA - spinal muskeltrofi	●				●	●	●	●	●		
Benamputaton	●	●	●	●	●	●	●			●	●
Traumatisk hjerneskade	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Pædiatri		●			●						
Geriatrici	●			●	●	●	●				
Bariatrici				●					●	●	●

\* Anbefales ved valg af Netti Dynamic S

# Tæl til 5!

**5 Seating Steps er terapeutens værktøj til at sikre den gode siddestilling for borgeren. Her skitseres processen og de ting, der skal afklares for at kunne konfigurere kørestolen og vurdere om løsningen er succesfuld.**

## 5 Seating Steps

1. Afklar forventninger og udfordringer
2. Observer, undersøg og vurder brugerens situation
3. Definer siddestrategi og sæt SMART-mål
4. Konfigurer siddeløsning
5. Evaluer

*Find et skema du kan bruge til at gennemføre de enkelte steps på [www.meyragroup.dk](http://www.meyragroup.dk).*





# Powerfulde el-kørestole til både inde og ude

*Indoor*

*Outdoor*



— TA Indoor Wave —

— iCHAIR XXL —

— Optimus 2 —

— iCHAIR MC3 —

— TA iQ FWD —

— TA iQ MWD —

— TA iQ FWD Stand-Up —

— TA iQ RWD —

# POWER

OPTIMUS 2



## Power



	iCHAIR MC3	Optimus 2	iCHAIR XXL	TA Indoor Wave	TA iQ FWD	TA iQ FWD Stand-Up	TA iQ MWD
ISO	ISO 7176-8:2014 ISO 7176-19:2008	ISO 7176-8:2014 ISO 7176-19:2008	ISO 7176-8:2014 ISO 7176-19:2008	7176-21:2009/10542-5/7176-19:2008	7176-21:2009/10542-5/7176-19:2008	7176-21:2009/10542-5/7176-19:2008/ 7176-14	7176-21:2009/10542-5/7176-19:2008
EN	12184:2014	12184:2014	12184:2014	12184:2014	12184:2014	12184:2014	12184:2014
Kørestolstype	Klasse B	Klasse C	Klasse B	Klasse A	Klasse B	Klasse B	Klasse B
Hastighed	6/10 km/t	6/10/15 km/t	6/10 km/t	6 km/t	10/12,5 km/t	10 km/t	10/12,5 km/t
Gyro	Optional			Optional	Standard	Standard	Optional
Kørestrækning	25-30 (35-40) km	50-70 km	35 (30-35) km	10-15 km	40-45 km	40-45 km	40-45 km
Max. brugervægt	160 kg	150 kg	200/250 kg	125 kg	140 kg	140 kg (liggende til stående 100)	140 kg
LED lys	Standard	-	Standard	Optional	Optional	Optional	Optional
Venderadius	900 mm	1200 mm	950 mm	450 mm	650 mm	650 mm	450 mm
Batterier	38- 45/ 63-73 Ah	66-80/ 88-107/ 110-125 Ah	63-73 Ah	2x38 Ah	2x80 Ah	2x80 Ah	2x80 Ah
Motor	2 x 220 /2 x 300 Watt	950 Watt	2 x 300/ 2 x 350 Watt	2 x 450 Watt	2 x 350 Watt	2 x 350 Watt	2 x 350 Watt
Elektronik	VR2/ R-Net	R-Net	R-Net	R-NET	R-NET	R-NET	R-NET
Længde uden benstøtter	870 mm	1030 mm	850 mm	695 mm	820 mm	880 mm	900 mm
Samlet bredde	630 mm	680 mm	670-920 mm	560 mm	580/630 mm	630 mm	580/630 mm
Sædehøjde	460-520 / 530-590 / 580-640 / 610-670 mm	610/580/650 mm	460/510/560 mm	400 mm	380 mm	440 mm	380 mm
Sædebredde	380-650 mm	380-560 mm	530-770 mm	380/400/450/500/550 Junior: 250/300/350 mm	380/400/450/500/550 Junior: 250/300/350 mm	380/400/450/ 500/550 mm	380/400/450/ 500/550 Junior: 250/300/350 mm
Sædedybde	400-560/ 400-560/ 500/ 480-530 mm	500/ 420-530/ 480-530 mm	430-600 mm	Trinløs variabel justering 250-600 mm	Trinløs variabel justering 250-600 mm	Trinløs variabel justering 250-600 mm	Trinløs variabel justering 250-600 mm
Max. forhindring	70 mm	110 mm	60 mm	30-65 mm	100 mm	100 mm	80 mm
Frihøjde	100 mm	-	-	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Tilslutningsmuligheder	Optional		Optional	Optional	Standard	Standard	Standard
Dahl docking	Optional	-	-	Optional	Optional	-	Optional
Elektrisk sædeløft	300 mm	-	300 mm	320 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Elektrisk sædevinkel	-2 - +33°	5-20°	0-18°	45°	45°	45°	45°
Elektrisk ryglænvinkel	-10 - +50°	-10 - +50	-10 - +50°	Forskellige optioner	Forskellige optioner	Forskellige optioner	Forskellige optioner
Elektriske benstøtter	Optional	Optional	Optional	Forskellige optioner	Forskellige optioner	Forskellige optioner	Forskellige optioner
Elektrisk justering af sædedybde fremad					150°		150°
Memory funktion						Ja	
Kombinationsfunktioner						Liggende-stående/ Siddende-stående	



*Letter den daglige færden igennem smalle passager - ideel til indendørs brug*



## Smal, kompakt, stabil og med fremragende køreegenskaber

TA Indoor Wave er designet til at lette den daglige færden indendørs, hvor der ikke er så meget plads samt til kortere ture udendørs. Stolen har

en samlet bredde på kun 560 mm. Samtidig har stolen et elektrisk løft på 320 mm og en lille venderadius. Stolen er også ideel til børn.

- Lav sædehøjde på 400 mm
- Minimal venderadius
- Forhjulsdrevet
- Kraftige motorer

### Øget frihed

Den rette løsning skal sikre at borgeren kan opnå frihed og klare sig så selvstændigt som muligt.





*Unik støddæmpning  
på alle hjul for minimal  
belastning af kroppen*



## Forhjulsdrevet kørestol med unik manøvrering

TA IQ FWD er en utrolig manøvreduktig forhjulsdrevet kørestol, der er nem at styre og komme rundt med både indenfor og udenfor. Den lave sædehøjde gør at stolen er velegnet som

sæde i bil. Samtidig muliggør den lave sædehøjde og løftehøjden på 300 mm at brugeren har øget mulighed for at deltage i dagligdagsaktiviteter.

- Lav sædehøjde - ned til 380 mm
- Løftehøjde på 300 mm
- Blød affjedring og rolig kørsel takket være fjederophængte forhjul
- Justerbar sædebund og rygstativ
- Ideel til brug i hjemmet men også til kørsel på ujævnt underlag
- Kan leveres med Varillite sædesystem samt de fleste kendte sædesystemer



*Centerdrevet kørestol der drejer og manøvrerer nemt - med god støddæmpning og lav venderadius*



## Centerdrevet kørestol i unikt og kompakt design

TA iQ MWD byder på unik affjedring og hjulophæng på alle hjul, hvilket giver en ekstrem glidende og affjedret kørsel og uovertrufne køreegenskaber. Den lave sædehøjde og løftehøjden på 300 mm gør, at brugeren har bedre mulighed

for at deltage i dagligdagsaktiviteter. Med sædesystemet fra Varilite kan stolen tilpasses individuelt til brugeren for at opnå den helt rigtige stabilitet og positionering og på den måde muliggøre at brugeren kan sidde i stolen i lang tid.

- Drejer og manøvreret utrolig let
- Lav sædehøjde - ned til 380 mm
- Blød affjedring og rolig kørsel takket være fjederophængte forhjul og unik affjedret hjulophæng.
- Kan leveres med Varilite sædesystem samt de fleste kendte sædesystemer.



*Ståfunktion i  
unik og kompakt  
design*



## Selvstændig mobilitet med fremragende ergonomi

TA IQ FWD Stand-Up har ligesom vores andre TA stole en unik affjedring og hjulophæng, som giver fantastisk blød affjedring og rolig kørsel over ujævnheder. Stolen er nem at komme rundt med både inde og ude, samtidig med at man har mulighed for at kunne stå fuldt oprejst. Stå funk-

tionen gør, at brugeren selvstændigt kan udføre endnu flere opgaver i privat såvel som arbejdsmæssig regi. Den gode siddestilling understøttes ved det store udbud af Varilite puder.

- Lav siddehøjde - ned til 440 mm
- Sædet kan gå fra liggende til stående og fra siddende til stående og omvendt

Der er mange fordele ved ståfunktionen. Vores samfund er ikke altid indrettet til kørestolsbrugere og samtidig er det rart at kunne klare sig selv. Som bruger af en kørestol med ståfunktion, vil brugeren kunne klare flere aktiviteter selv - som f.eks. at nå ting i de høje køkkenskabe eller på alle hylder i supermarkedet. Der er også mange fysiologiske fordele ved en ståstol. Organerne aflastes og man forebygger tryksår og styrker hele bevægelsesapparatet.



*Kraftig motor  
og træk på de  
forreste hjul  
indbyder til ture  
i naturen*



## Den uovertrufne outdoor stol – en rigtig slider!

Optimus 2 er perfekt til brugere, der nyder friheden ved køreture udenfor med god komfort på alle slags underlag. Stolen med den gode trækraft og de gode off-road egenskaber klarer nemt ujævnt underlag, forhøjninger og kantsten. Trækket på de store hjul fortil, samt styrken i

motoren giver brugeren mulighed for at komme vidt omkring – selv i svært terræn. For at brugeren opnår den bedste siddestilling på de lange ture, udstyres Optimus 2 individuelt med passende sædeenhed.

- Brugervægt op til 150 kg
- Brugervenligt joystick og tastatur med optisk og taktilt feedback
- Optional ryg og sædevinkel for variation af siddestillingen
- Punkteringsfri dæk
- 50-70 km rækkevidde

Manøvredygtig  
e-power stol op til  
sædebredde 770 mm



## Yderst stabil konstruktion til brugere med vægt op til 250 kg

Den manøvredygtige elektriske kørestol overbeviser med sofistikerede funktioner og et smart design. Ideel kørekomfort på lange strækninger takket være affjedring på drivhjulene.

iCHAIR XXL kan udstyres med ErgoSeat sædesystemet, som er designet til ekstra støtte samt at sikre optimal trykfordeling og dermed beskyttelse af huden.

- Brugervægt op til 250 kg
- Forstærkede komponenter
- 2 kraftige 350 Watt motorer
- Stort udvalg af specielle styreenheder
- Optional 300 mm løftehøjde (op til 180 kg brugervægt)



God støddæmpning for mindre belastning af kroppen



## Gør lang siddetid mere behagelig

Oplev den ideelle kørekødfort med Meyra iCHAIR MC3. En stabil og komfortabel stol, der ved hjælp af de forskellige siddesystemer tilpasses brugeren individuelt for at opnå den bedst mulige positionering. For at give brugeren de bedste mulig-

heder for lang tid i stolen, er alle 4 hjul affjedret, så det også er behageligt at være på tur udenfor. For den optimale siddestilling er variation vigtig, dette understøttes ved 35° tilt. Som option kan 60° rygvinkling tilvælges.

- Brugervægt op til 160 kg
- Siddedybde fra 400 - 560 mm
- 35 elektrisk tilt
- Optional 300 mm løftehøjde
- LED belysning med god levetid

### Mere tid med venner

Den rette kørestol og siddestilling sikrer at brugeren kan være sammen med familie og venner - hjemme, på besøg eller på tur i byen eller naturen.



# Forbliv aktiv med manuelle, bruger- manøvrede kørestole fra Meyra og Panthera

*Gemi aktiv*

*Aktiv*

*Meget aktiv*



Meyra Avanti

Meyra Flash  
Meyra Smart

Panthera Micro  
Panthera Bambino  
Panthera Swing

Meyra Nano

Meyra Hurricane

Panthera X

## Active



	Panthera Bambino	Panthera Micro	Panthera S3 Swing	Panthera X	Meyra Flash*	Meyra Avanti**	Meyra Smart S
ISO	ISO-7176-19:2008 ISO-10542:2000		ISO-7176-19:2008 ISO-10542:2000 ISO 7176-16	ISO 7176-16		ISO 7176-19	ISO 7176-19
Sædebredde	240/270/300/330 mm	240/ 270 mm	360/390/420/ 450/500 mm	330/360/390/ 420/450 mm	240-300 / 240-400 mm	300-360/ 360-580/ 360-580 mm	320-520 mm
Krydsramme	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Bredde foldet	-	-	-	-	290-350 mm	280 mm	280 mm (0° camber) 330 mm (3° camber)
Sædedybde	180-250/ 230-300/ 230- 300/ 230-300 mm	150-200 / 200-250 mm	400 mm	350-460 mm	240-300/ 320-400 mm	330-380/ 350-460/ 480- 530 mm	380-500 mm
Samlet bredde	SB +280 mm	SB + 220 mm	SB + 210 mm	SB + 210 mm	SB + 180 mm (0° camber) SB + 220 mm (3° camber) SB + 260 mm (6° camber)	SB + 180 mm	SB + 180 mm
Sædehøjde for	410 mm	310 mm	450 mm	470 mm	390-470 / 390-480 mm	370-500/ 370-560/ 370-560 mm	440-540 mm
Sædehøjde bag	390 mm	310 mm	430 mm	430 mm	360-440/ 390-470 mm	370-470/ 390-520/ 390- 520 mm	370-530 mm
Ryghøjde	170-250 (270-350) mm	220 mm	200-450 mm	220-350 mm	250-400 mm	340-400/ 380-500/ 380- 500 mm	Variabel 250-500 mm (+25 mm)
Max. brugervægt	60 kg	30 kg	100 kg (SB 450/500: 150 kg)	100 kg	75 kg	75/135/160 kg	150 kg
Kørestolsvægt	81-88 kg	3,5-3,8 kg	9,4-10,3 kg	4,4-4,6 kg	10 kg	12/13/14 kg	Min. 10,5 kg
Min. transportvægt	4,9 kg	2,35 kg	4,6 kg	2,1 kg	8 kg	8/8,5/9 kg	6,5 kg
Længde med benstøtter	600 mm	620 /725 mm	780 mm	740 mm	670-745/ 855-930 mm	880/ 1040/ 1120 mm	880-1030 mm
Armlæns højde	-	-	-	-	-	165-240/200-290 mm	170-245 mm

\*Midi/ Maxi \*\*kort ramme/mellem ramme/ lang ramme

# Active



### **Panthera Micro**

Panthera Micro er stolen til de mindste børn fra 1 til 5 år. Det er vigtigt at kunne bevæge sig rundt på egen hånd, især for børn. Derfor er Panthera Micro bygget til at være så let at flytte som muligt.



### **Panthera Bambino**

En letkørende hverdagsstol til børn med de samme fantastiske funktioner som de større familiemedlemmer. Nem at køre. Nem at justere. Let at løfte. Ganske enkelt en rigtig aktiv stol til børn.



### **Panthera X**

Panthera X har chassis og ryg i kulfiber. Den fantastiske lethed og styrke af kulfiber gør Panthera X til verdens absolut letteste kørestol med en transportvægt på 2,1 kg.



### **Panthera S3 Swing**

Stolen giver en rigtig god siddekomfort ved hjælp af justerbar ryg- og sædepolstring. Stolens balanceposition kan justeres, så brugeren kan finde netop den balance på kørestolen, som giver tryghed.



## Aktive kørestole til børn og voksne

Pantheras stole til børn og voksne er skabt med fokus på brugervenlighed, kvalitet og lav vægt. Målet er at give brugerne mulighed for at være så aktive og selvstændige som muligt. Fastramme

kørestole er nøglen til nem håndtering. Ved at benytte stive materialer og faste rammer, reducerer Panthera energibehovet til næsten 0.

- Til aktive brugere der ønsker en letkørt stol med lav vægt til hverdagsbrug både inden- og udendørs
- Konstruktionen gør at bruger nemt selv kan løfte stolen ind i bilen.
- Små ydre mål
- Meget lav vægt

Vokser med barnet -  
utrolig fleksibel og stadig  
perfekt tilpasset



## Minimalistisk krydsrammestol med maksimal fleksibilitet til børn og unge

Mobilitet betyder læring gennem bevægelse og er et elementært grundbehov og et vigtigt terapeutisk aspekt i behandlingen af fysisk handicappede børn og unge. Motivationen for selvaktivitet og glæden ved bevægelse påvirker den sensomotoriske og psykosociale udvikling. Flash kørestolen

er til aktive børn og unge, som har brug for en perfekt tilpasset stol, der kan vokse med dem. Stolen er ekstrem manøvreedygtig og har et flot og frisk design.

- Til aktive børn og unge
- Både til brug i hjemmet og udenfor
- Hjulafstand og tyngdepunkt kan indstilles individuelt
- God plads til benene
- Sædeenheden vokser med barnet



Alsidig  
krydsrammestol



## Celebrate your life – alsidig og aktiv

Meyra Avanti er en stol, der er meget anvendelig ved geriatriske og neurologiske sygdomsforløb. Stolen kan foldes til transport og hjulene kan

tages af, så den nemt kan transporteres i bil. Stolen er velegnet til personer med resterende gang- og ståevner.

- Stolen kan nemt tages med i bilen, da rammen kan foldes og hjulene tages af.
- Frontal transfer er muligt, da benstøtterne kan svinges til siden
- Siddehøjde fra 370 mm mulig
- Mange indstillingsmuligheder

*Smart og let.  
Enkel betjening,  
så brugeren kan  
fokusere på de gode  
oplevelser.*



## Ualmindelig stabil krydsrammestol med fantastiske køreegenskaber

Det smarte design giver dig en stilren kørestol. De mange rammefarver og individuelt tilbehør gør, at du kan kreere lige præcis din stol som du vil have den. Med Smart S får brugeren en enorm stabil krydsrammestol med fantastiske køreegenskaber, der samtidig byder på markedets smalleste mål,

når den er klappet sammen. Så vil du gerne regelmæssigt ud på tur, samtidig med at du sikrer dig den korrekte positionering og stabilitet, er Smart S et godt valg.

- Kompakt aktivstol – kun 280 mm sammenfoldet
- Optimeret foldesystem gør det muligt at folde stolen ind og ud med én hånd
- Mange rammefarver
- Køregeometri, sæde og ryg kan finjusteres



# Optimal støtte, variation og hudbeskyttelse

En bruger af en komfortkørestol sidder i gennemsnit 8-10 timer dagligt i kørestolen. Af den grund er det vigtigt at kørestolen, udover gode køreegenskaber, har god siddekomfort samt giver mulighed for variation mellem aktivitet og hvile. Alle disse behov er der tænkt over ved udviklingen af vores stole.

# COMFORT



## Comfort



	Netti Dynamic III HD	Netti S	Netti III	Netti XHD+XXHD
ISO	ISO 7176-19:2008	ISO 7176-19:2008	ISO 7176-19:2008	
EN	EN 12183:2014	EN 12183:2014	EN 12183:2014	EN 12183:2014
Sædebredde	350/380/400/430/450/500 mm	250/300/350 mm	350/380/400/430/450/500 mm	500/550/600/650/700/750 mm
Sædebredde fleksibilitet	2x -25 mm	-70 mm	2x -25 / 2x+12 mm	2x -25 mm
Sædedybde	400-500 (525-575)* mm	250-350 (440)* mm	400-500 mm	400-500
Ryghøjde	500/600 mm	400 mm	500-600 mm	500-600 mm
Sædehøjde, til sædeplade	460-490 (480-530)* mm	470 (440) mm	460-490 (405-530)* mm	475-485 mm
Kørestolsvægt uden puder	36 kg	25 kg	36 kg	36 kg
Max. Brugervægt	135 kg	75 kg	145 kg	200 kg
Tiltvinkel	-9° - +16°	-3° - +35°	-9° - +16°	-9° - +16°
Recline / rygvinkling	dynamisk	90-125°	86-133°	86-113°
Samlet bredde	SB + 220 (SB +190)* mm	SB +345 (SB +155)* mm	SB +220 (SB +190)* mm	SB +240 (SB +210)* mm
Armlænsenhøjde	280-310 mm	120-290 mm	170-310 mm	185-325 mm
Underbenslængde med standard benstøtter	320-680 mm	220-320 mm	320-680 mm	360-640 mm
Dynamiske komponenter	Standard	Optional	Optional	Optional
Universalholder til medicinal apparater	Optional	-	-	Optional

\* optional



Variation og  
mange optioner  
sikrer den optimale  
siddestilling



## Komfortstolen med de mange muligheder

Netti III er komfortkørestolen, som ikke kun giver brugeren fremragende komfort, men også giver plejepersonalet og de pårørende nem og brugervenlig betjening.

Med denne stol opnår man de suveræne fleste muligheder for tilbehør og justeringsmuligheder, så stolen kan tilpasses til selv brugere med krævede udfordringer.

- Dynamiske komponenter muligt
- Utallige benstøtteløsninger
- Siddehøjdespænd fra 405 til 530 mm.
- Kompatibel med hjælpemotor for øget selvstændighed
- Fås også i en HD og XHD-version samt en udgave med elektiske funktioner på benstøtter, tilt og rygvinkling





*Dynamisk stol sikrer mindre ubehag og overskud til aktiviteter*

## Hvad er målene med dynamiske siddesystemer?

Vi ønsker at tilpasse kørestolen til brugeren og ikke omvendt. Derfor tillader vi vores dynamiske kørestole at bevæge sig med brugeren i stedet for at låse kørestolen i en statisk position, som brugeren vil modarbejde.

### Målene er:

- Tillad bevægelse
- Distribution af kræfter
- Forebyggelse af skader
- Forbedret postural kontrol
- Muliggør selvstændig livsførelse
- Minimere slitage på kørestolen



## Dynamisk kørestol arbejder i synergi med brugerens bevægelser

Med dynamiske funktioner på sæde, ryg, ben samt hovedstøtte er det muligt for brugeren at opleve mindre ubehag ved spasmer, da kørestolen tillader og understøtter de ufrivillige bevægelser. I en statisk stol er der risiko for at brugeren glider frem i sædet og dermed mister den gode siddestilling.

En dynamisk kørestol følger brugerens bevægelser og sikrer, at brugeren vender tilbage i den korrekte tilpassede siddestilling efter en spasme. Det gør det muligt at sidde længere tid i stolen uden smerter og behov for repositionering. Med 5 forskellige dynamiske stole kan du vælge den stol, der passer bedst til brugeren.

- Dynamisk sædeplade
- Valgfri dynamisk rygløsning efter behov
- Modular opbygning
- Forstærket design
- Stabil og sikker konstruktion
- Kompatibel med hjælpemotor for øget selvstændighed

### Til brugere med specifikke udfordringer, som f.eks:

- Dystoni
- Ufrivillige bevægelser
- Parkinsons sygdom
- Huntingtons sygdom
- Demenssyndromer
- Dyskenetisk cerebral parese



*Mange justeringsmuligheder.  
Kan tilpasses det voksende barn*



## Designet til langtidspositionering af børn og unge

Netti S er designet til langtidspositionering af børn og unge. Stolens design understøtter barnets vækst og giver mulighed for justering af sædedybde, sædebredde, benlængde og ryglænsenhøjde.

Til brugere med udfordringer, som f.eks:

- Delvis eller komplet immobile børn og unge
- Hemiplegi
- Brugere med nedsat stabilitet i overkroppen

- Let håndtering for ledsager
- Mange justeringsmuligheder
- Læsbare skalaer og piktogrammer letter betjeningen
- Stolen kan løbende tilpasses det voksende barn





*Maksimal aflastning  
og støtte for brugere  
op til 200 kg  
og sædebredde  
op til 750 mm*



## Maksimal trykaflastning for bariatriske brugere

Brugere med høj vægt har brug for hyppige ændringer af siddestillinger for at skabe den nødvendige variation for at beskytte huden. Kørestolen har indstillelig rygvinkling og sædetilt - for at skåne plejepersonalet tilbydes disse funktioner også elektrisk.


Netti XHD har den kendte Netti komfort og de mange tilpasningsmuligheder, så vi kan hjælpe brugeren til flere timer i stolen for at deltage i aktiviteter og hyggestunder med venner.

- Forstærket med dobbelt gascylindre på recline og tilt
- Forstærket ramme til øget vægtbelastning
- Mange optionsmuligheder som holder til medicinsk udstyr, dynamiske delkomponenter

Vi tilbyder flere forskellige kørestolsmodeller til bariatriske brugere. F.eks. kan vi også levere elektriske funktioner og løsninger med brugervægt op til 450 kg. Kontakt din konsulent for yderligere information.

# Stort udvalg af siddepuder

Siddepuden er et vigtigt element i den gode siddestilling. Her skabes grundlag for stabilitet og den rette positionering samt forebyggelse af tryksår.

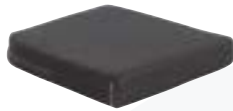

## Netti Uno Seat

Ergonomisk pude - altid klar til brug!



## Netti Sit

Gode trykfordelende og stabiliserende egenskaber.



## Ride Forward

En komfortabel kørestols-pude, der giver trykafledning og moderat støtte. Ofte brugt af patienter i tryksårskategori 1 og 2.



## Ride Java Seat

Giver det højeste niveau af hudbeskyttelse og postural kontrol. Ofte brugt af patienter i tryksårskategori 3-4.

*safe-load  
off-load*



## Alova

Temperaturfølsom pude i høj kvalitet



## Biofit

Tryksårsforebyggende pude med kølende effekt



## Varilite Meridian

Det oplagte valg af pude til kørestolsbrugere med tendens til fremadskridende bækken samt høj risiko for tryk.



## Varilite Proform NX

Det oplagte valg af pude til kørestolsbrugere med høj risiko for tryk, og svære ofte asymmetriske behov for positionering.



## Varilite Evolution

Det oplagte valg af pude til kørestolsbrugere med høj risiko for tryk og behov for symmetrisk positionering.



## Varilite Zoid PSV

Det oplagte valg af pude til aktive kørestolsbrugere med moderat risiko for tryk.

# Stort udvalg af rygge

Rygpudden og -systemet er et vigtigt element i den gode siddestilling. Her skabes grundlag for stabilitet og den rette positionering samt forebyggelse af tryksår.



## Netti Uno Back

God og fast helstøbt skum rygpudder med lændestøtte.



## Netti Smart

Netti Smart giver god plads til armene, hofterne, skuldrene og god lændestøtte. Ryggen har en Flip-over bagerst, som fastholder pudren i korrekt position.



## Netti Kyphotic

Til brugere med kyfrose og krum ryg



## Netti Stabil

Netti Stabil giver god plads til arme, hofter, skuldre og god ergonomisk lændestøtte. Ryggen har en Flip-over bagerst, som fastholder pudren i korrekt position.



## Netti Super Stabil

Til brugere med behov for øget stabilisering af overkroppen. Ekstra dybe sidestøtter samt justerbar lændestøtte.



## Ride Java Back

Til vores Meyra og Netti stole. Optimer bækkenstøtte og giv balance til overkroppen – fås i 3 højder og 2 dybder.



## Ride Decaf Back

Til børn og unge. Optimer bækkenstøtte og giv balance til overkroppen – fås i 2 højder.



## Varilite ICON

Med 4 forskellige udformninger af ryggen finder du lige netop den ryg der passer til dit behov.



## V-trak deep contour

V-Trak deep contour har integrerede dynamiske sidestøtter, som giver sidestøtte nøjagtigt der hvor brugeren behøver det.

# Stort sortiment af kørestole



Hos Meyra Group tilbyder vi et bredt produktsortiment af kørestole indenfor Power, Active og Comfort. På de følgende sider ser du en oversigt af hele vores produktsortiment - og du kan læse endnu mere på [www.meyragroup.dk](http://www.meyragroup.dk). Vi hjælper også gerne med at finde den helt rette løsning til brugeren - så tag gerne kontakt til en af vores konsulenter.

## Power

Med en elektrisk kørestol fra Meyra Group kan handicappede, ældre mennesker og brugere med svære funktionsnedsættelser igen deltage i hverdagen. Hver eneste el-stol i vores sortiment udmærker sig med smarte funktioner og en lang række tilpasningsmuligheder. Takket være det kompakte design er vores elektriske kørestole absolut manøvredygtige – både indendørs og udendørs.

### Indoor - outdoor

- TA IQ FWD
- TA IQ MWD
- TA IQ RWD
- TA IQ FWD Stand-up
- TA Indoor Wave
- iCHAIR XXL
- iCHAIR MC1
- iCHAIR MC2
- iCHAIR MC3
- iCHAIR Orbit
- iCHAIR McFront

### Ståfunktion

- TA IQ FWD Stand-Up
- iCHAIR Sky

### Outdoor

- Optimus 2

### Dynamic

- iCHAIR Netti Dynamic S

Se flere  
detaljer på side 8-17  
og [meyragroup.dk](http://meyragroup.dk)



**iCHAIR Orbit**



**iCHAIR MC2**



**iCHAIR MC1**



**iCHAIR McFront**



**iCHAIR Netti Dynamic S**





## **Active**

Vores aktive kørestole er udviklet af højt kvalificerede ingeniører i samarbejde med brugere. Den adaptive aktive kørestol er kendetegnet ved en bred vifte af tilpasningsmuligheder, sådan at stolen kan tilpasses til de individuelle kropsmål og de ønskede køreegenskaber. Jo mere præcis denne tilpasning er, jo mere aktivt kan stolen anvendes af brugeren i hverdagen og til sport.

### **Krydsramme**

- Avanti
- Smart F / S
- Nano X

### **Fastramme**

- Nano
- Nano C
- Hurricane S
- Panthera X
- Panthera S3 Swing

### **Kids**

- Flash
- Panthera Bambino
- Panthera Micro

Se flere  
detaljer på side 18-23  
og [meyragroup.dk](http://meyragroup.dk)



**Nano X**



**Nano**



**Avanti**



**Nano C**



**Hurricane S**

inspire  
joy of life

## **Comfort**

Komfortkørestolene fra Netti er designet til brugere, der sidder i kørestolen i længere tid. Stolene har derfor gode siddesystemer og mange tilpasningsmuligheder, så kørestolen kan tilpasses den enkelte brugers behov for støtte, trykaflastning og variation.

### Netti 4U

Enkle, lette løsninger. Modellerne i vores 4U familie er kendetegnet ved lav vægt og smal samlet bredde.

- Netti 4U CE
- Netti 4U CE Plus
- Netti 4U CED
- Netti 4U CED XL
- Netti 4U Base

### Netti III

Netti III familien er kørestolene med det største udvalg af tilbehør og mulighed for bedst individuel tilpasning og justering. Her kan du imødekomme selv komplekse krav.

- Netti III
- Netti III EL
- Netti III HD
- Netti III XHD / XXHD

Se flere  
detaljer på side 24-29  
og [meyragroup.dk](http://meyragroup.dk)



**NETTI 4U CE**



**Netti 4U CE Plus**



**Netti 4U CED**



**Netti 4U Base**



**Netti Dynamic Base**



## Netti Dynamic

Komfort for brugere med bevægelsesforstyrrelser. Netti Dynamic System er et patenteret system til brugere, der lider af f.eks. cerebral parese eller dystoni. Med Netti Dynamic System kan man fastholde brugeren i en god siddeposition hele dagen – og derved sikre optimal trykfordeling og deltagelse i dagligdagens aktiviteter.

- Netti Dynamic Base
- Netti Dynamic CED
- Netti Dynamic III HD
- Netti Dynamic S

## Netti Kids

Det innovative koncept og de mange konfigurationsmuligheder gør at vi kan imødekomme de individuelle krav hos børn og unge samtidig med at vi tager højde for ønskerne fra forældrene og terapeuterne.

- Netti S
- Netti Dynamic S

## Netti Customized

Kørestole skal tilpasses til brugeren og ikke omvendt. Derfor møder vi nogle gange brugere med udfordringer, som ikke kan løses af standardudstyr. Her vil vores team af erfarne medarbejdere skabe det tilbehør eller den stol, som opfylder de konkrete behov.



**Netti Dynamic CED**



**Netti 450 T**



**Netti Dynamic S**



**Netti III HD**



**Netti III EL**



## **SCAN KODEN**

og tilmeld dig vores  
email nyhedsbrev



### **Brands: Netti og Meyra**

Kløftehøj 8  
8680 Ry  
Tel: 87 88 73 00  
Mail: [info@My-Netti.com](mailto:info@My-Netti.com)



[www.meyragroup.dk](http://www.meyragroup.dk)

### **Brands: TA og Panthera**

Centervej Syd 2  
4733 Tappernøje  
Tel: 56 72 57 77  
Mail: [ta-service@ta-service.dk](mailto:ta-service@ta-service.dk)