

*feel the  
difference*



# **NETTI PRECISION™ SIDDEPUDER**

Næste generation hudbeskyttelse med Ergomise™ Technology

# NÆSTE GENERATION

## hudbeskyttelse

En sund siddestilling er afgørende for at forebygge tryksår. Netti Precision siddepuder tilbyder en banebrydende tilgang til siddestabilitet, optimering af trykfordeling og dermed hudbeskyttelse. Uanset om brugeren sidder i en Power-, Aktiv- eller Comfort-kørestol, sikrer Netti Precision optimal støtte og beskyttelse.



Vores specialister i siddekomfort har gennemtænkt alle detaljer i Netti Precision™ puderne fra jævn trykfordeling og målrettet aflastning af udsatte områder til reduktion af punktuel tryk og valg af materialer i høj kvalitet.

Resultatet er topmoderne puder med flere hårdhedsgrader, som takket være den innovative Ergomise™ Technology tilbyder enestående komfort, høj stabilitet og effektiv hudbeskyttelse.

Vi har udviklet en afbalanceret kombination af bløde og faste støttezoner, der fremmer en stabil siddestilling og samtidig beskytter huden. Puderne er særligt velegnede til brugere, der sidder i kørestolen i lang tid, og til brugere med sart hud eller øget risiko for tryksår.

Netti Precision™ siddepuderne er klar til brug, hygiejniske og pålidelige i det lange løb.

### EASY, READY & SAFE TO USE

- ✓ Klar til brug ved levering.
- ✓ Ingen tilpasning nødvendig.
- ✓ Vedligeholdelsesfri.
- ✓ Hygiejnisk: kernen er vaskbar ved 65° C og tørrer hurtigt.
- ✓ Lav risiko for forkert brug eller u hensigtsmæssig justering, da løbende justering eller tilpasning ikke er nødvendig.



### MULTI-HÅRDHEDSPUDER FOR STABILITET OG HUDBESKYTTELSE

Med Ergomise™ Technology skaber vi puder, der består af områder og lag med forskellig hårdhed – fra superblød til meget hård. De forskellige hårdheder sikrer den rette stabilitet for bækkenet samt den bedste trykfordeling og trykaflastning.



## NETTI PRECISION ACTIVE

- ✓ Brugere med behov for hudbeskyttelse gennem ventilation, fugt- og temperaturregulering
- ✓ Behov for støddabsorbering
- ✓ Trykfordeling
- ✓ Optimeret til kørestolsbrugere af manuelle, aktive kørestole



## NETTI PRECISION 1

- ✓ Når brugeren har risiko for hud- og trykskader
- ✓ Optimal trykfordeling og trykaflastning
- ✓ Beskytter de udsatte knogleområder
- ✓ Støtte til bækkenet sikrer en god siddestilling
- ✓ God nedsyning minimerer risikoen for at glide fremad.



## NETTI PRECISION 2

- ✓ For brugere med følsom hud, høj risiko for hudskader eller allerede opståede hudskader
- ✓ Fremragende trykfordeling og trykaflastning
- ✓ Forbedret trykaflastning af haleben og bækkenbund
- ✓ Støtte til bækkenet sikrer en god siddestilling
- ✓ God nedsyning minimerer risikoen for at glide fremad.



Klar til brug



Stabiliserende



Trykfordelende



Ventilerende




Temperaturstabiliserende



Hygienisk


## UDVIKLET MED ERGOMISE™ TECHNOLOGY

Med Ergomise™ Technology sikrer vi, at vores siddepuder leverer dokumenterede resultater. Netti Precision™ puderne og teknologien bag er testet både internt og af testinstituttet ved University of Pittsburgh. Resultaterne viser enestående ydeevne sammenlignet med konkurrerende puder.\*

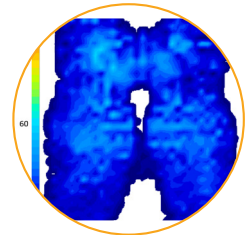


### TEMPERATURKONTROL

Høj temperatur kan føre til øget fugtighed, som øger risikoen for hudskader. Materialet i Netti Precision™ hjælper med at holde temperaturen nede - og dermed mindske risikoen for tryksår. Ifølge testinstituttet ved University of Pittsburgh er temperaturen mellem bruger og Netti Precision™ materialet kun 32,7°C efter tre timers brug. Til sammenligning ligger temperaturen for lignende puder mellem 33,7°C og 35,7°C.\*

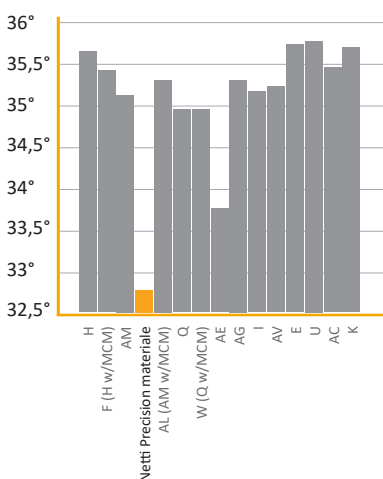


### KONTROL AF FUGTIGHED

Fugtighed over 60% kan øge hudens sårbarhed og forårsage friktion mellem huden og tekstiler, hvilket potentielt kan føre til tryksår. Derfor har vi fokus på at holde fugtigheden lav. Testene fra University of Pittsburgh viser, at puden med Netti Precision™ materiale har en fugtighed på 62% efter 3 timer, sammenlignet med et gennemsnit på 81,2% for de 14 andre puder, den blev sammenlignet med.\*

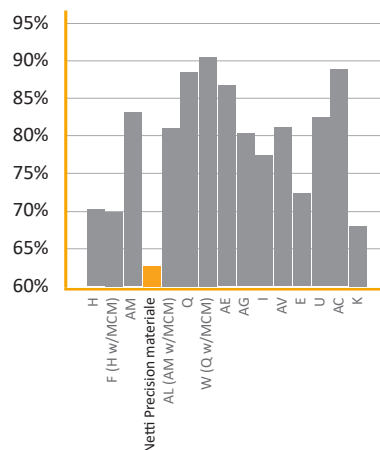

### EFFEKTIV TRYKAFLASTNING

Når et tryksår først er opstået, kan det medføre smertefulde behandlinger, langvarigt sengeleje og i mange tilfælde hospitalsindlæggelse. Netti Precision™ sikrer en effektiv trykfordeling, hvilket er afgørende for at reducere risikoen for trykskader hos kørestolsbrugere. Trykaflastningsmålinger har vist, at Netti Precision™ overgår andre trykaflastende puder, når det gælder reduktion af punktuelle belastninger\*.

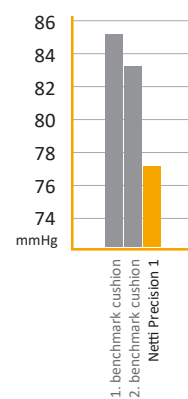

# Ergomise™ Technology

Ergomise™ Technology løfter digital modellering ved at kombinere den med vores ekspertise inden for siddestilling. Resultatet er evidensbaserede, siddepuder med høj ydeevne.

<b>Kernens materiale</b>	Kernen er lavet af biokompatibel termoplastisk polyuretan (TPU) - uden tilsatte ftalater.  Stella+ betræk: åndbart, elastisk og slidstærkt materiale med integreret skumindlæg.  Easy Care+ betræk: Slidstærkt, åndbart med integreret skumindlæg. Let at rengøre, da overfladen kan aftørres.
<b>Betræktyper</b>	Incontinence betræk: Et åndbart, gennemtrængeligt betræk kombineret med et 100 % uigennemtrængeligt underbetræk sikrer effektiv beskyttelse og nem håndtering. Væsker, der irriterer huden, ledes væk, opsamles og holdes inde i betrækket. Dette forhindrer forurening af omgivelserne og gør at man nemt kan tømme betrækket. Derefter kan kernen skylles og betrækket vaskes.
<b>Størrelse, mm (Sædebredde x Sædedybde)</b>	Netti Precision™-puderne fås i forskellige standardstørrelser, der passer til de mest almindelige mål. Tag gerne kontakt til os, hvis du har brug for en anden størrelse.  Netti Precision 1: SW 350-600 mm, SD 400-550 mm Netti Precision 2: SW 350-600 mm, SD 400-550 mm Netti Precision Active: SW 320-520 mm, SD 340-500 mm  Se varenr. og HMI-nr. på meyragroup.dk Kontakt os for andre størrelser.
<b>Rengøring</b>	Kernen kan maskinvaskes ved op til 65°C og tørrer hurtigt i luften takket være den åndbare struktur. Betrækket kan maskinvaskes ved 60° C.
<b>Brugervægt</b>	Puderne er afpasset efter deres dimensioner og har en maksimal brugervægt på 160 kg.



MEYRA GROUP Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry  
danmark@meyragroup.com | T: 87 88 73 00 | www.meyragroup.dk

2026-03

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer på vores produkter og påtager os intet ansvar for trykfejl eller farveafvigelser i vores materialer.