Netti®
ACCESSOIRES

MOUNTING DESCRIPTION

MONTERINGSANVISNING / MONTAGEANLEITUNG/
DESCRIZIONE DELMONTAGGIO / NOTICE DE MONTAGE

HOFTEBELTE / HIP BELT / BECKENGURT /
CINTURA PELVICA / CINTURA VENTRALE

Netti III, Netti V, Netti 4U CE, Netti 4U CED, AdaptPro



inspire joy of life


MD0052 ML 2026 - 10

MONTERINGSANVISNING

2stk 13 mm fastnøkler

1. Trekk beltet gjennom hoftebeltefestet (dette er formontert på Netti Mini).
2. Tre beltet tilbake gjennom belte-klemmen.
3. Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i rygghengslebraketten med den vedlagte skrue og mutter.
4. Hoftebeltebraketten bør stå i 45° vinkel.

1

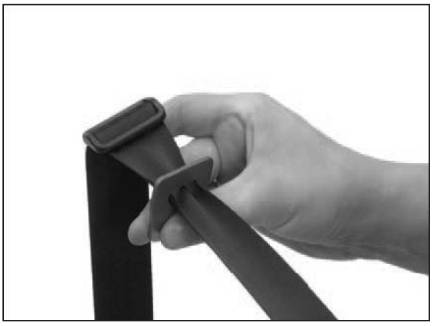

MOUNTING DESCRIPTION

2pcs 13 mm open-end spanners.

1. Pull the belt through the hole in the hip belt bracket .
2. Thread the belt back through the enclosed belt clamp.
3. Fix the hip belt bracket in the bacmost hole of the backrest hinge using the enclosed screws and nuts.
4. The hip belt bracket should be mounted in a 45° angle.

2



MONTAGEANLEITUNG

2 Stück 13 mm Maulschlüssel

1. Gurt durch die Öffnung des Gurt-halters ziehen.
2. Gurt durch die Gurtschnalle zurückziehen.

3. Gurthalter mit Hilfe der beigefügten Schraube und Muttern im hinteren Loch des Rückenlehnen - scharniers montieren.
4. Den Gurthalter im 45°-Winkel am Rahmen montieren.

DESCRIZIONE DELMONTAGGIO

Chiave semplice 2 pz. 13 mm

1. Tirare la cinghia attraverso il foro nella staffa della cintura pelvica.
2. Infilare il retro della cinghia nella fibbia della cinghia.
3. Fissare la staffa della cintura pelvica allo snodo dello schienale nel foro più indietro, utilizzando le viti e i dadi inclusi.
4. La staffa della cintura pelvica dovrebbe essere montata ad un angolo di 45°.

NOTICE DE MONTAGE

2 clés anglaises de 13 mm

1. Faites passer la ceinture dans la patte de fixation.
2. Faites repasser la ceinture dans l'attache.
3. Montez la patte de fixation dans le dernier trou à l'arrière de la ferrure du dossier, à l'aide des vis et écrous livrés.
4. Orientez la boucle à environ 45°.

3





4





Netti®
Part of MEYRA GROUP



Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com