Netti®
ACCESSORIES

Netti® **H-GURT ADAPTER KITS**

Montageanleitung



inspire joy of life

MD0074 DE 2026 - 09

MONTAG E DER H-GURT ADAPTER KITS

INHALT:

1.	**Einführung zur Montage der H-Gurt A dapter Kits**	**2**
2.	**Netti H-Gurt Adapter Kits für:**	**4**
	2.1 Netti Sitzbreiten 35-60cm	**4**
	2.2 Netti Sitzbreiten 35-60cm und Rückenverlängerung	**4**
3.	**Montage der H-Gurt Adapter Kits**	**5**
	3.1 Montage der H-Gurt Adapter Kits mit Gurtführungsstange	**5**
	3.2 Montage der H-Gurt Adapter Kits bei Rückenverlängerung	**8**
	3.3 Montage der unteren Gurtbefes tigungen des H-Gurt Adapter Kits	**10**
4.	**Netti H-Gurt Adapter Kits für Netti III/CED/CE Plus Models**	11

1. Einleitung

Dieses Montageset stellt Befestigungspunkte für die Installation eines H-Gurts an den Rollstühlen Netti III und Netti 4U bereit. Das Set ermöglicht eine sichere Befestigung eines H-Gurts, um Benutzer zu unterstützen, die eine zusätzliche Oberkörperpositionierung und Haltungsstabilität benötigen.

Netti-Rollstühle können mit verschiedenen Positionierungsgurten ausgestattet werden, um unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden. Je nach Rollstuhlmodell können Gurte entweder an integrierten Befestigungspunkten oder mithilfe spezieller Adapterkits montiert werden. Dieses Montageset gewährleistet die korrekte Installation kompatibler H-Gurte an den Rollstühlen Netti III und Netti 4U.

Hinweis: Dieses Set ist ausschließlich für die Produktserien Netti III und Netti 4U vorgesehen. Für die Rollstühle Netti V und Netti AdaptPro sind separate Montagesets erhältlich.



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Gebrauchsanweisung des Rollstuhls, an dem das Netti-Gurtadapter-Kit montiert wird.

Der Benutzer und die Begleitperson müssen in die Nutzung des Netti-Rollstuhls eingewiesen und geschult werden.
Eine separate Gebrauchsanweisung ist zusammen mit dem Rollstuhl an den Endnutzer auszuhändigen.

DEN ROLLSTUHL AN DEN BENUTZER ANPASSEN:
Die Sitztiefe sowie gegebenenfalls die Balance des Rollstuhls sind einzustellen. Zudem sind die Höhe des Fußbretts, die Höhe der Armlehnen, die Höhe und Tiefe der Kopfstütze sowie die Höhe des Rückenpolsters an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen.

KIPPSCHUTZ:
Bei korrekter Montage verhindert der Kippschutz, dass der Rollstuhl nach hinten kippt. Überprüfen Sie die Position des Kippschutzes und passen Sie diese gegebenenfalls an, falls der Rollstuhl in der Kippstellung instabil ist.

Für weitere Informationen zur Anpassung des Rollstuhls an den Benutzer besuchen Sie bitte die Wissens- und Hilfsmittelbereiche auf my-netti.com.

Abbildungen können vom gelieferten Produkt abweichen.

Für sehbehinderte Personen können Bedienungsanleitungen und Kataloge unter my-netti.com heruntergeladen werden.

Wichtige Hinweise sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Symbol für verbotene Handlungen.
Für Schäden oder Folgen, die durch die Durchführung dieser Handlungen entstehen, können keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

Warnsymbol.
Bei diesem Symbol ist besondere Vorsicht geboten.

Symbol für wichtige Informationen.

Symbol für nützliche Tipps.

SSymbol für Werkzeuge.


Abbildung mit montierten Gurtbefestigungen und Rückenverlängerung sowie einem H-Gurt, der an der Befestigungsstange mit Rollen angebracht ist.




2. NETTI H-GURTADAPTER-KITS

2.1 Netti Gurtadapter-Kit für Netti-Rollstühle mit Sitzbreiten von 35 bis 60 cm

Hinweis: Jede Z-Stange in allen Gurtadapter-Kits verfügt über zwei innenliegende, verschiebbare Muttern. Die obere Mutter dient bei Bedarf zur Befestigung des Rückenverlängerungsprofils und des Klettstoffs an der Z-Stange. Die untere Mutter dient zur Befestigung der Z-Stange am Rückenrohr des Rollstuhls.

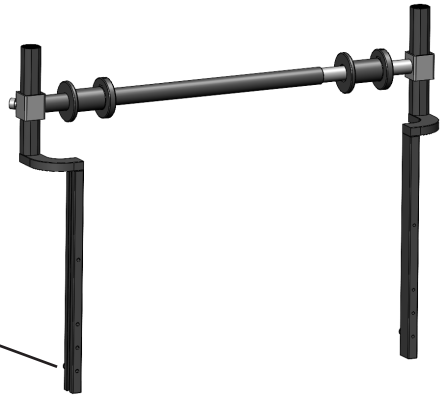

2.2 Netti Gurtadapter-Kit für Netti-Rollstühle mit Sitzbreiten von 35 bis 60 cm einschließlich Rückenverlängerungs-Kit.

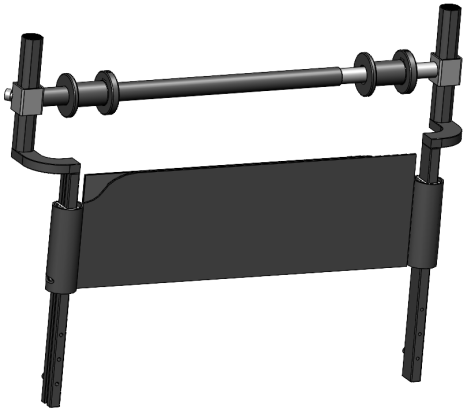

Untere Rückenhalterungen



3. MONTAGE VON H-GURTADAPTER-KITS

3.1 Montage des Netti Gurtadapter-Kits mit Befestigungshalterungen und Rolleneinheiten


Hinweis: Beim Netti CED/S gibt es keine Schraube A zur Befestigung der Halterungen. Dort werden die Befestigungshalterungen ausschließlich mit Schraube B fixiert.

Entfernen Sie den Kunststoffstopfen an der Oberseite der Rückenrohre des Rollstuhls. Entfernen Sie die Schiebegriffe oder den Schiebebügel, um die Montage zu erleichtern. Lösen Sie anschließend mit einem

Innensechskantschlüssel die M6-Schraube A auf beiden Seiten.


Halten Sie die Mutter im Inneren des Rohres mit einer Zange fest und entnehmen Sie diese, sobald die Schraube gelöst ist.

Entfernen Sie anschließend die Schraube B, mit der der Rückenbezug an jedem Rückenrohr befestigt ist.

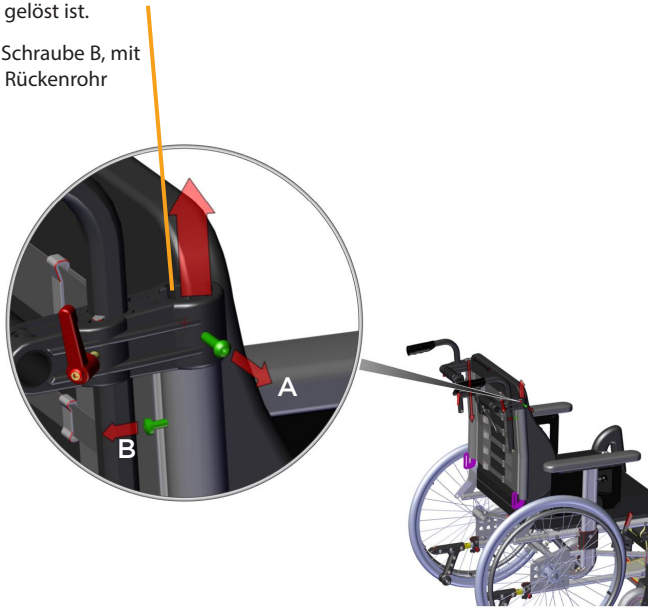


Führen Sie die Z-Stangen in die Rückenrohre ein.

Befestigen Sie jede Z-Stange, indem Sie die Schraube A in die verschiebbare Mutter C einsetzen, die sich im Profil der Befestigungshalterung befindet. Die Mutter lässt sich am einfachsten positionieren, indem das Profil etwa 45 mm in das Rückenrohr eingeschoben wird. In dieser Position befindet sich die Mutter an ihrer untersten Stelle, sodass die seitliche Schraube A von außen in die Mutter eingeschraubt werden kann. Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest, bevor die Schraube B eingesetzt wurde.

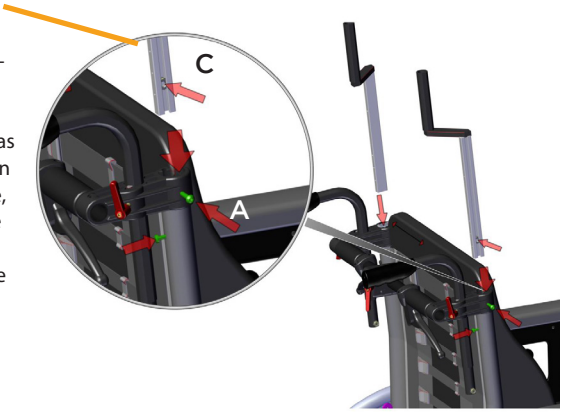


Schraube B dient zur Höheneinstellung (und gleichzeitig zur Befestigung des Rückenbezugs).

Sie muss in eines der drei nach hinten gerichteten Löcher der Z-Halterung eingesetzt werden. Verschieben Sie die Z-Halterung nach oben oder unten, bis die Schraube in das gewünschte Loch eingreift. Die niedrigstmögliche Position ergibt einen Abstand von ca. 75 mm zwischen der Oberkante des Rückenrohres und der Unterseite des waagerechten Teils der Z-Halterung. Die weiteren Bohrungen befinden sich jeweils in einem Abstand von 35 mm.
Sobald die gewünschte Höhe eingestellt ist, ziehen Sie die beiden Schrauben A und B auf beiden Seiten fest.

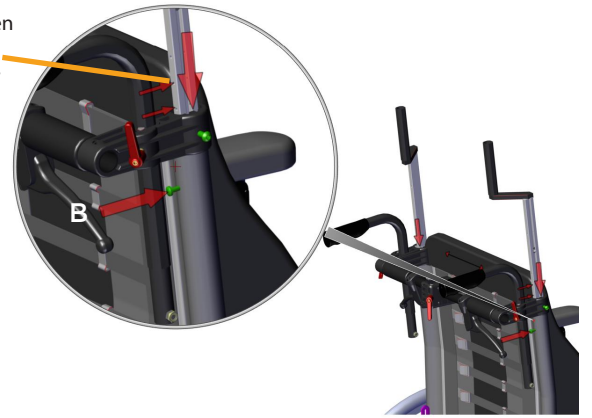


Setzen Sie anschließend die H-Gurtstange in die Z-Stangen ein.

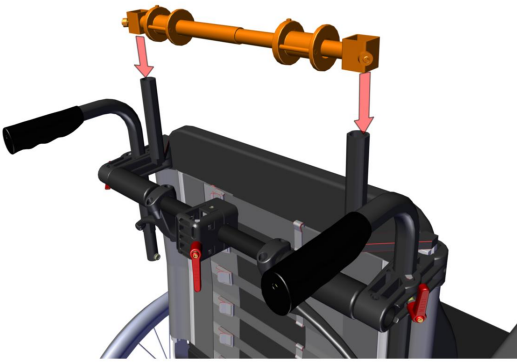


Befestigen Sie die H-Stange in der gewünschten Höhe an den Z-Stangen. Verwenden Sie hierzu einen Innensechskantschlüssel und die mit der H-Stange mitgelieferte Madenschraube. Die oberen Gurtbänder müssen waagerecht und auf Höhe der Schultern des Benutzers positioniert werden.

Hinweis: Wird ein Schultergurt zu niedrig befestigt, wird der Rollstuhlnutzer nach unten gezogen.

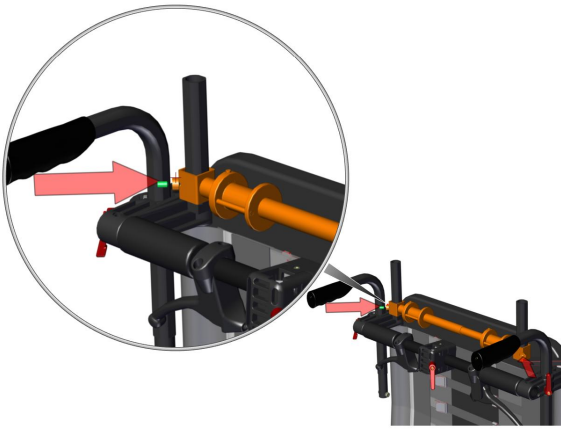

Befestigen Sie die Rollen an der H-Stange in der gewünschten Breite. Verwenden Sie hierzu einen Innensechskantschlüssel und die mit den Rollen mitgelieferten Madenschrauben.
Hinweis: Befinden sich die oberen Gurtbänder zu weit auseinander, sitzt das Gurtsystem nicht korrekt und es besteht die Gefahr, dass die Gurte von den Schultern des Benutzers rutschen.

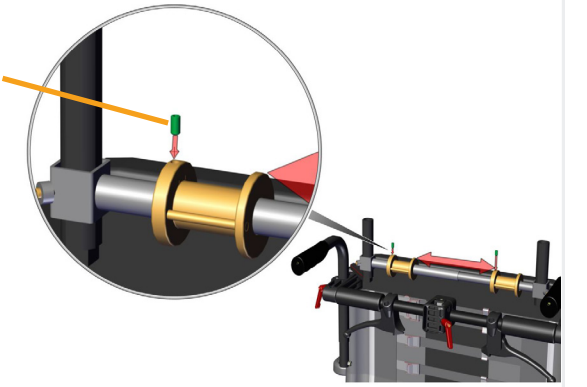


Befestigen Sie anschließend die Gurte des H-Gurts an den Rollen.


Bitte wählen Sie ein passendes Gurtsystem aus unserem Katalog auf unserer Website my-netti.com aus.



Fädeln Sie den Gurt wie dargestellt ein.

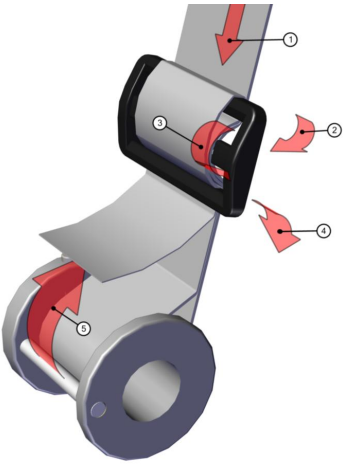

Diese Gurtführung gewährleistet einen sicheren und festen Halt.

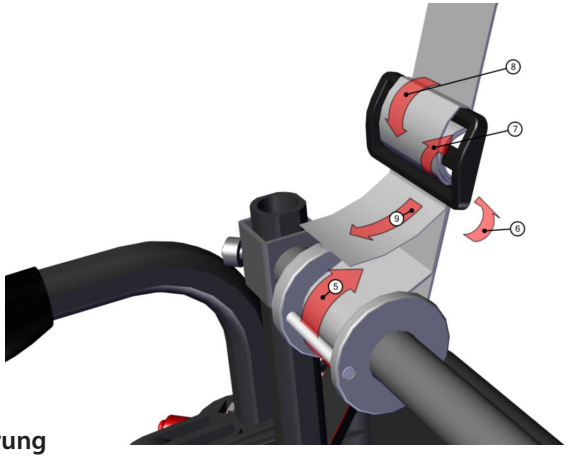


3.2 Montage der Rückenverlängerung am Netti H-Gurtadapter-Kit

Falls eine Rückenverlängerung erforderlich ist, um die korrekte Höhe für die H-Stange zu erreichen, müssen die Rückenverlängerungseinheiten vor der Montage der Z-Stangen eingesetzt werden.

Das Rückenverlängerungs-Kit enthält zwei Verlängerungsprofile, jeweils mit einem Rückenbezugsteil und Klettverschluss.

Schieben Sie die Verlängerungsprofile über das Rückenprofil der Z-Stange und befestigen Sie sie mit einer M6-Schraube, die in die obere verschiebbare Mutter D eingreift. Verwenden Sie hierfür einen Innensechskantschlüssel.

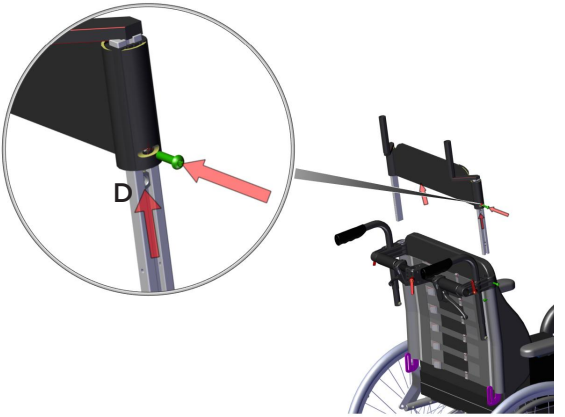

Befestigen Sie die beiden Rückenverlängerungsbezüge miteinander. Kürzen Sie diese bei Bedarf, damit der Klettverschluss für die Befestigung eines hohen Rückenpolsters frei zugänglich bleibt.



Vervollständigen Sie anschließend die Montage des H-Gurtadapter-Kits wie zuvor auf den Seiten 4 bis 7 beschrieben.




Höheneinstellungen:
Bei Verwendung der H-Gurtbefestigungshalterungen ohne Rückenverlängerung kann die Höhe der H-Gurt-Halterungen um 2 × 35 mm verstellt werden.
Die Höhe der oberen H-Gurtbefestigung an der horizontalen Stange kann um 90 mm angepasst werden.
Das Rückenverlängerungs-Kit erhöht die Rückenhöhe um 90 mm.
Zusätzlich kann die Höhe um weitere 17 mm + 35 mm erhöht werden.

3.3 Montage der unteren Gurtbefes tigungen des H-Gurt Adapter Kits


Die untere Rücken-Gurthalterung wird wie folgt montiert:

Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Rückenlehne am Rollstuhlrahmen befestigt ist.

Die Schrauben sind mit Loctite gesichert.

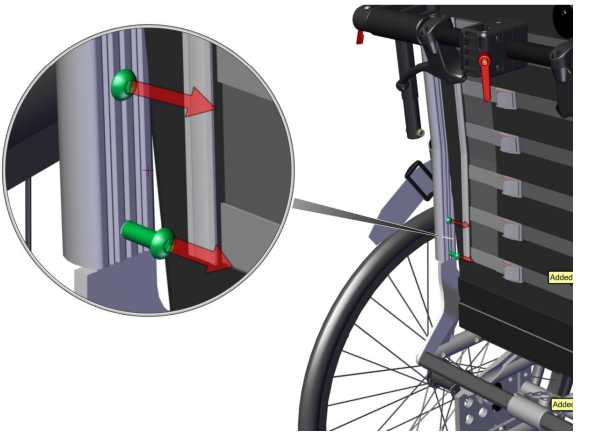


Befestigen Sie die Gurthalterung mit den vier mitgelieferten M6×20-mm-Innensechskantschrauben (2 × 2 Stück).

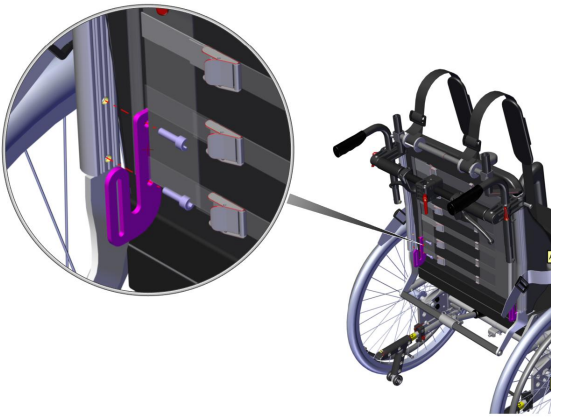

Führen Sie anschließend den Gurt durch die Gurthalterung.

Detaillierte Anweisungen zur Gurtführung finden Sie auf Seite 7.

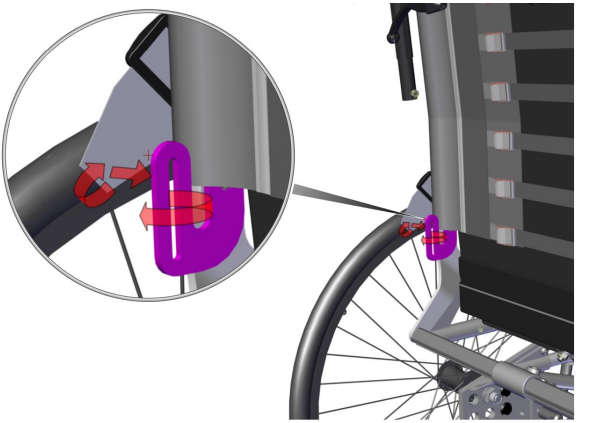


4. **NETTI H-GURT ADAPTER KITS FÜR** NETTI III/CED/CE PLUS **MODELS**

1 H-gurtadapter-Kit für Standard-Rückenhöhen 350 bis 600 mm Stück 96921



2 H-gurtadapter-Kit mit verlängerter Rückenhöhe für Rückenhöhen von 350 bis 600 mm Stuck 96923

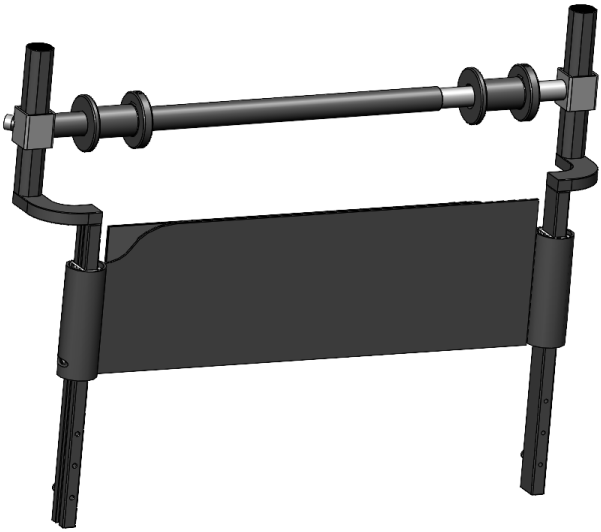

Netti®
Part of MEYRA GROUP



Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com