Netti®
ACCESSORIES

Netti®

Kits d'adaptation pour harnais

Instructions de montage



inspire joy of life

MD0074 FR 2026 - 09

SOMMAIRE:

1. Introduction au montage du harnais Netti **2**

2. Kits d'adaptation pour harnais Netti **4**
2.1 Netti largeur d'assise 35-60 cm **4**
2.2 Netti largeur d'assise 35-60 cm avec extension de dossier **4**

3. Montage du kit d'adaptation pour harnais Netti **5**

3.1 Montage du kit d'adaptation pour harnais Netti avec étrier de fixation et enrouleurs **5**

3.2 Montage du kit d'adaptation pour harnais Netti avec extension de dossier **8**

3.3 Montage des supports inférieurs de dossier pour le kit d'adaptation pour harnais Netti **10**

4. Adaptateurs de harnais pour les modèles Netti III/CED/CE Plus 11

1. Introduction

Ce kit de montage fournit les points de fixation nécessaires à l'installation d'un harnais en H sur les fauteuils roulants Netti III et Netti 4U. Le kit permet un montage sûr du harnais en H afin de soutenir les utilisateurs nécessitant un maintien supplémentaire du haut du corps et une meilleure stabilité posturale.

Les fauteuils roulants Netti peuvent être équipés de différents harnais de positionnement afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Selon le modèle de fauteuil roulant, les harnais peuvent être montés à l'aide de points de fixation intégrés ou de kits d'adaptation dédiés. Ce kit de montage garantit l'installation correcte des harnais en H compatibles sur les fauteuils roulants Netti III et Netti 4U.

Remarque : Ce kit est destiné exclusivement aux séries de produits Netti III et Netti 4U. Des kits de montage distincts sont disponibles pour les fauteuils roulants Netti V et Netti AdaptPro.



Veuillez lire attentivement ces instructions de montage et prêter une attention particulière à la instructions d'utilisation du fauteuil roulant sur lequel le kit d'adaptation pour harnais Netti est installé.

L'utilisateur ainsi que l'accompagnant doivent recevoir des instructions et une formation concernant l'utilisation du fauteuil roulant Netti. Une notice d'utilisation distincte doit être fournie à l'utilisateur final avec le fauteuil roulant.

ADAPTEZ LE FAUTEUIL ROULANT À L'UTILISATEUR:
Réglez la profondeur d'assise et, si nécessaire, l'équilibre du fauteuil roulant, la hauteur du repose-pieds, la hauteur des accoudoirs, ainsi que la hauteur et la profondeur de l'appui-tête. Ajustez également la hauteur du coussin de dossier du fauteuil.

DISPOSITIF ANTI-BASCULE
Lorsqu'il est correctement installé, le dispositif anti-bascule empêche le fauteuil de basculer vers l'arrière. Veuillez vérifier la position des dispositifs anti-bascule et les ajuster si le fauteuil manque de stabilité lorsqu'il est incliné.

Pour plus d'informations sur l'adaptation du fauteuil roulant à l'utilisateur, veuillez consulter les ressources et outils disponibles sur my-netti.com.

Les illustrations peuvent différer du produit livré.

Pour les personnes malvoyantes, les manuels et catalogues peuvent être téléchargés sur : my-netti.com

Les points importants sont signalés par les symboles suivants :

Symbole d'action interdite Toute utilisation non conforme à cette indication peut entraîner l'annulation de la garantie.

Symbole d'avertissement Lorsque ce symbole apparaît, une attention particulière est requise.

Symbole d'information importante.

Symbole de conseil utile


Symbole d'outil.

Illustration montrant les supports de harnais et l'extension de dossier avec un harnais en H installé sur la barre du support de fixation équipée d'enrouleurs.




2. KITS D'ADAPTATION POUR HARNAIS NETTI

2.1 Kit d'adaptation pour harnais Netti pour fauteuils roulants Netti, largeur d'assise de 35 à 60 cm.

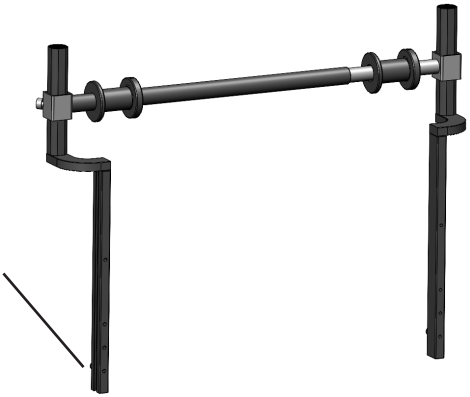

Remarque importante: Veuillez noter que chaque barre en Z de tous les kits d'adaptation pour harnais comporte deux écrous coulissants intégrés. L'écrou supérieur est destiné à la fixation du profilé d'extension de dossier et de la bande autoagrippante (Velcro®) sur la barre en Z, lorsque cela est nécessaire.
L'écrou inférieur est destiné à la fixation de la barre en Z sur le tube du dossier du fauteuil roulant.

2.2 Kit d'adaptation pour harnais Netti pour fauteuils roulants Netti, largeur d'assise de 35 à 60 cm, avec extension de dossier.

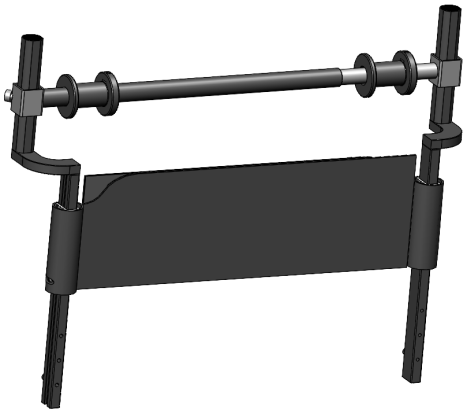

Supports inférieurs de dossier



3. MONTAGE DES KITS D'ADAPTATION POUR HARNAIS

3.1 Montage du kit d'adaptation pour harnais Netti avec supports de fixation et enrouleurs


Remarque importante : Veuillez noter que sur les fauteuils roulants Netti CED/S, il n'y a pas de vis A pour maintenir les supports de fixation. Seule la vis B assure la fixation des supports de fixation.

Retirez le bouton en plastique situé au sommet des tubes de dossier du fauteuil roulant. Retirez les poignées de poussée ou la barre de poussée afin de faciliter le montage.

À l'aide d'une clé Allen, desserrez la vis M6 A de chaque côté.


Maintenez l'écrou à l'intérieur du tube à l'aide d'une pince et retirez-le une fois la vis desserrée.

Retirez la vis B qui fixe la toile de dossier sur chacun des tubes du dossier.

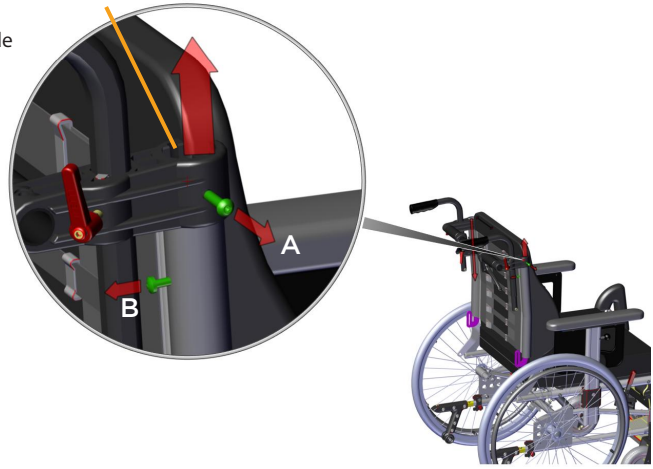

Insérez les barres en Z dans les tubes du dossier.

Fixez chaque barre en Z en insérant la vis A dans l'écrou coulissant C situé à l'intérieur du profilé du support de fixation.

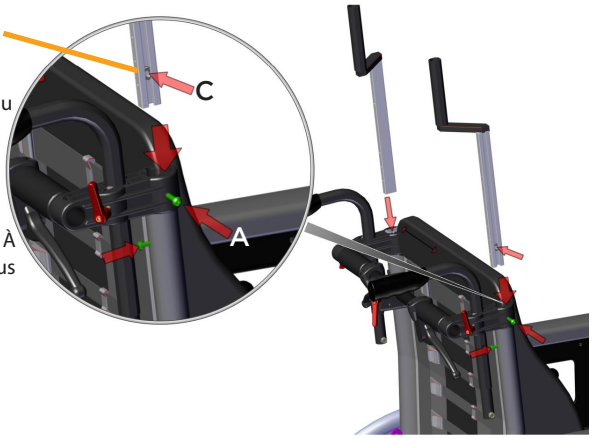


Pour localiser plus facilement l'écrou, poussez le profilé d'environ 45 mm dans le tube du dossier. À cette position, l'écrou se trouve à son point le plus bas et la vis latérale A peut être introduite dans l'écrou depuis l'extérieur.

Ne serrez pas la vis A avant d'avoir introduit la vis B.

La vis B sert au réglage en hauteur (et maintient également la toile de dossier).

Elle doit être insérée dans l'un des trois trous orientés vers l'arrière de la barre en Z.

Faites coulisser la barre en Z vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la vis puisse être engagée dans l'un des trous.

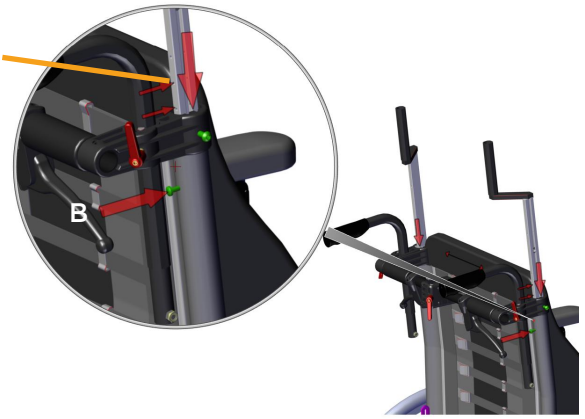


La position la plus basse possible correspond à une distance d'environ 75 mm entre le haut du tube de dossier et la face inférieure de la partie horizontale de la barre en Z.

Les autres trous sont espacés de 35 mm les uns des autres.

Une fois la hauteur souhaitée réglée, serrez les deux vis A et B des deux côtés.

Insérez la barre de harnais en H dans les barres en Z

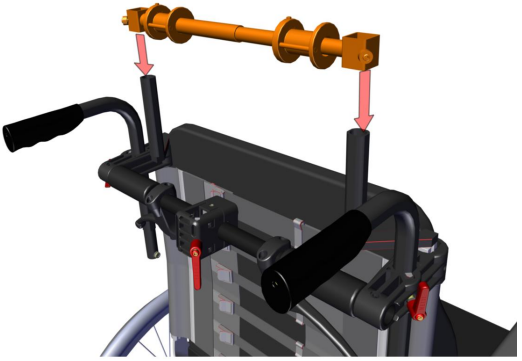


Fixez la barre du harnais en H à la barre en Z à la hauteur souhaitée.

Utilisez une clé Allen pour la fixer à l'aide de la vis de pression fournie avec la barre du harnais en H.

Les sangles supérieures doivent être positionnées horizontalement et alignées avec le sommet des épaules de l'utilisateur.


Remarque importante : si un harnais d'épaules est fixé trop bas, l'utilisateur du fauteuil roulant sera tiré vers le bas, ce qui peut nuire au positionnement correct et au confort d'utilisation.

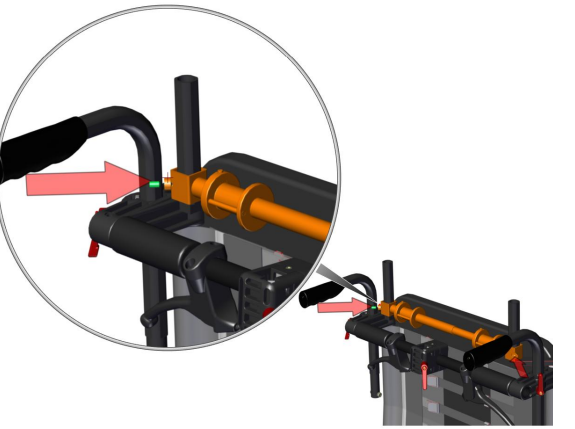

Fixez les enrouleurs sur le tube de la barre du harnais en H à la largeur souhaitée.

Utilisez une clé Allen pour serrer la vis de pression fournie avec chaque enrouleur.

Remarque importante : si les sangles supérieures du harnais sont positionnées trop éloignées l'une de l'autre, le harnais ne pourra pas assurer un positionnement correct, avec un risque de glissement hors des épaules de l'utilisateur.

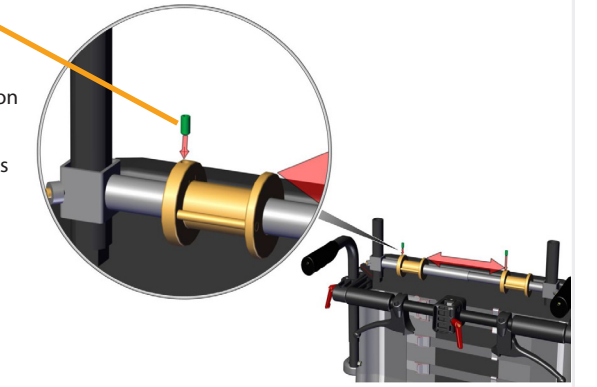


Fixez les sangles du harnais en H aux enrouleurs.


Pour choisir un modèle de harnais adapté, consultez notre catalogue sur my-netti.com.



Faites passer la sangle conformément à l'illustration

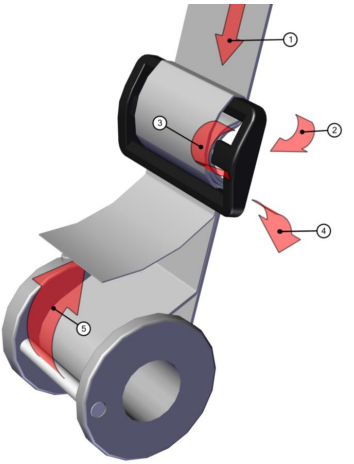


Ce mode de passage de la sangle garantit un maintien sûr et stable.

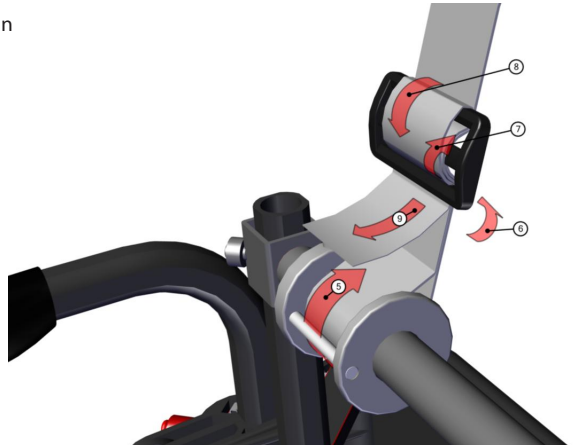

3.2 Montage de l'extension de dossier sur le kit d'adaptation pour harnais en H Netti

Si une extension de dossier est nécessaire pour obtenir la hauteur correcte de la barre du harnais en H, les éléments d'extension de dossier doivent être montés avant l'installation des barres en Z. Le kit d'extension de dossier comprend : deux profilés d'extension ; une pièce de toile de dossier avec bande autoagrippante (Velcro®) pour chaque profilé. Faites coulisser les profilés d'extension sur le profilé arrière de la barre en Z et fixez-les à l'aide d'une vis M6 engagée dans l'écrou coulissant supérieur D, en utilisant une clé Allen.

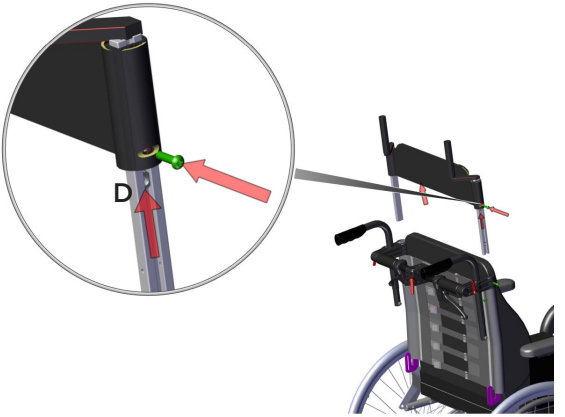

Assemblez les deux parties de la toile d'extension de dossier et, si nécessaire, ajustez leur longueur afin de ne pas recouvrir la bande autoagrippante (Velcro®) destinée à la fixation d'un coussin de dossier haut.



Réglage de la hauteur:

Lors de l'utilisation des supports de fixation du harnais en H sans extension de dossier, la hauteur des supports du harnais en H peut être réglée sur deux positions supplémentaires de 35 mm chacune.

La hauteur du point de fixation supérieur du harnais en H sur la barre horizontale peut être réglée sur une plage de 90 mm.

Le kit d'extension de dossier augmente la hauteur du dossier de 90 mm.


En outre, la hauteur peut être augmentée de 17 mm + 35 mm supplémentaires.



3.3 Montage des supports inférieurs de dossier et fixation du harnais en H Netti


Le support inférieur de sangle de dossier est monté comme suit :

Retirez les deux vis de fixation reliant le dossier du fauteuil roulant au châssis.

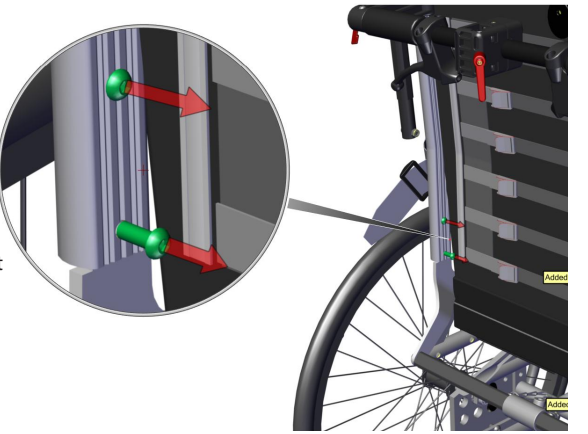


Les vis sont sécurisées à l'aide d'un frein-filet Loctite®.

Fixez le support de sangle à l'aide des 2 vis M6 × 20 mm à tête hexagonale et des 2 écrous fournis avec les supports.

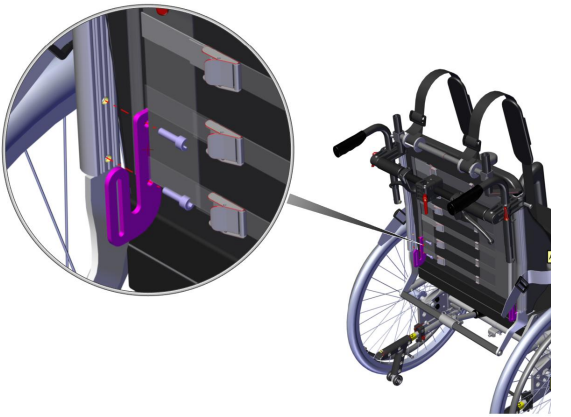

Enfilez la sangle dans le support de sangle.

Pour les instructions détaillées relatives au passage de la sangle, veuillez vous reporter à la page 7.

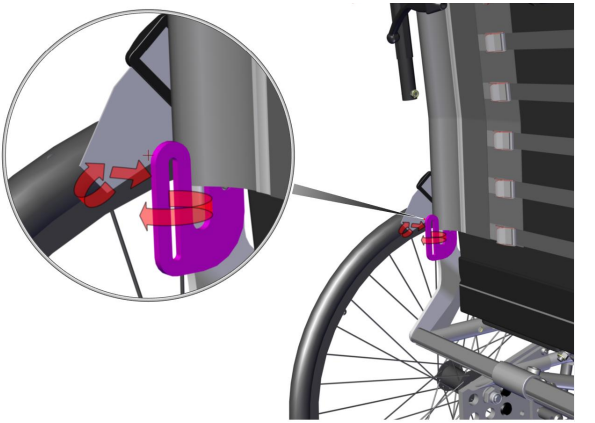


4. ADAPTATEURS DE HARNAIS POUR NETTI III/CED/CE PLUS (ÉDITION 2026 – UNE TAILLE UNIQUE ADAPTÉE À TOUTES LES LARGEURS D'ASSISE)

1 Kit d'adaptation de harnais pour hauteur de dossier standard (350 - 600 mm) Référence 96921



2 Kit d'adaptation de harnais avec extension de dossier (350 - 600 mm) Référence 96923

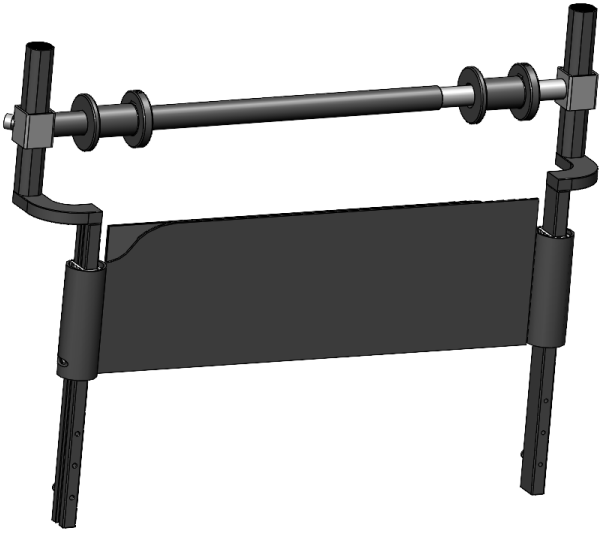

Netti®
Part of MEYRA GROUP



Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com