Netti®
ACCESSORIES

Netti® *Ceinture à 2 ou 4 points*

Instructions de montage



inspire joy of life

MD0139 FR 2026 - 09 - 30

Comment monter une ceinture à 2 ou 4 points sur un fauteuil roulant équipé d'une plaque d'assise rigide

•Ceinture à 2 points pour un fauteuil roulant équipé d'une plaque d'assise rigide : commandez le kit 45279
•Ceinture à 4 points pour un fauteuil roulant équipé d'une plaque d'assise rigide : commandez le kit 45280

Le kit 45279 comprend :		
Quantité	Référence	Description
2	86282	Kit de fixation universel
2	41698	Équerre de fixation 50 mm
2	20032	Vis M8
2	20068	Rondelle M8
2	20412	Écrou autobloquant M8


Le kit référence 45280 est composé de 2 × kits référence 45279.
Pour monter le kit de fixation universel sur un fauteuil roulant équipé d'une plaque d'assise rigide, veuillez suivre les instructions MD0109UK, Vous pouvez le télécharger sur my-netti.com

Kit de fixation universel 86282



Une fois le kit de fixation universel installé, vous pouvez monter n'importe quelle ceinture à 2 points sur l'équerre en L. Le kit (référence 45279) comprend deux adaptateurs de ceinture (référence 41698). Montez-les sur l'équerre en L à l'aide de la rondelle, de la vis et de l'écrou autobloquant, comme illustré sur les figures ci-dessous.

Pour une ceinture à 4 points, quatre adaptateurs de ceinture sont nécessaires. Veuillez commander le kit 45280.Le montage des adaptateurs de ceinture est toujours identique.

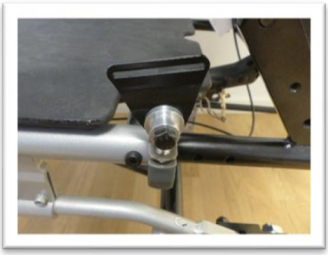





Veuillez suivre les instructions de la page suivante pour régler la ceinture.

CEINTURE DE MAINTIEN À DEUX POINTS.



1. Déterminez le point d'ancrage souhaité.
2. Centrez la ceinture sur le bassin et faites passer l'extrémité de la sangle dans la patte de fixation plate.
3. Serrez fermement la sangle.



CEINTURE DE MAINTIEN À QUATRE POINTS.



1. Déterminez le point d'ancrage souhaité.
2. Suivez les instructions de montage ci-dessus pour installer les sangles principales.
3. Fixez les sangles secondaires au fauteuil roulant de manière à ancrer les sangles principales.
4. Serrez les sangles secondaires afin d'empêcher tout déplacement des sangles principales.



Réglage :
Lorsque la ceinture est correctement réglée et serrée, elle doit être ajustée fermement afin de maintenir le bassin de l'utilisateur en toute sécurité. Pour les ceintures rembourrées, tirez sur l'anneau en D jusqu'à ce que tout le jeu soit supprimé et que les rembourrages situés sous la boucle soient en contact. Si un réglage de longueur est nécessaire pour assurer un ajustement correct, ou si la ceinture doit être retirée pour son nettoyage, cela peut être effectué à l'aide des embouts de fixation de la ceinture.



Contrôle de sécurité :
Une fois l'utilisateur correctement installé dans le fauteuil roulant, demandez-lui de se pencher vers l'avant puis de chaque côté afin de vérifier le bon ajustement de la ceinture.

Vérifiez les points suivants :

1. Le fonctionnement normal de la boucle et des sangles de réglage.
2. Le confort : vérifiez l'absence de points de pression ou de frottement.
3. Le positionnement : si la ceinture est trop haute ou trop basse, ajustez les points d'ancrage.
4. L'absence d'interférence avec d'autres équipements : repositionnez les points d'ancrage si nécessaire.

Cette notice fait partie intégrante de chaque ceinture à 2 ou 4 points. Elle doit être remise à l'utilisateur ou à son aidant et conservée pour consultation ultérieure.

Pour toute question concernant ce produit ou cette description de montage, veuillez contacter notre service clientèle.

Cette description de montage ainsi que d'autres sont disponibles en téléchargement sur le site my-netti.com.

Netti®
Part of MEYRA GROUP

Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com