Netti ACCESSORIES

Netti 2-punkts- och 4-punktsbälte

Monteringsanvisning



inspire joy of life

MD0139 SE 2026 - 09 - 30

Montering av 2- eller 4-punktsbälte på en rullstol med fast sitsplattae

2-punktsbälte för rullstol med fast sitsplatta – beställ sats 45279
4-punktsbälte för rullstol med fast sitsplatta – beställ sats 45280

Sats 45279 innehåller::		
Antal	Artikelnummer	Beskriving
2	86282	Universellt fästsats
2	41698	Vinkelbeslag 50 mm
2	20032	Skruv M8
2	20068	Bricka M8
2	20412	Låsmutter M8


Sats 45280 består av 2 x stas 45279
För att montera det universella fästsatsen på en rullstol med fast sitsplatta, följ anvisningarna i MD0109UK, som kan laddas ner på my-netti.com.

Universellt fästsats 86282



När det universella fästsatsen har monterats kan valfritt 2-punktsbälte monteras på L-fästet.Med sats 45279 medföljer två bältesadaptrar 41698.
Montera dem på L-fästet tillsammans med bricka, skruv och låsmutter enligt bilderna nedan

För ett 4-punktsbälte behövs fyra bältesadaptrar. Beställ då sats 45280.
Monteringen av bältesadaptrarna är alltid densamma.

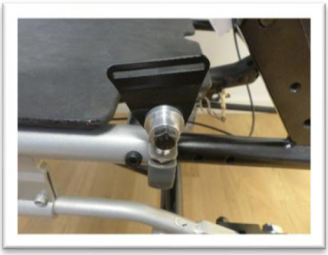





Följ anvisningarna på nästa sida för att justera bältet.

TVÅPUNKTSBÄLTE FÖR BÄCKENSTÖD





1. Välj önskad fästpunkt.
2. Centrera bältet över bäckenet och trä bältesbandets ände genom fästbeslaget.
3. Dra åt bältet så att det sitter stadigt.

FYRPUNKTSBÄLTE FÖR BÄCKENSTÖD





1. Välj önskad fästpunkt.
2. Följ monteringsanvisningarna ovan för att montera de primära remmarna.
3. Fäst de sekundära remmarna på rullstolen så att de förankrar de primära remmarna.
4. Dra åt de sekundära remmarna för att förhindra att de primära remmarna rör sig.

Justering:
När bältet är korrekt justerat och åtdraget ska det sitta stadigt så att användarens bäcken hålls säkert på plats.På vadderade bälten ska D-ringen dras åt tills allt slack har eliminerats och dynorna under spännet ligger an mot varandra.Om bältets längd behöver justeras för att uppnå god passform, eller om bältet behöver tas bort för rengöring, kan detta göras med hjälp av bältets ändbeslag.



Säkerhetskontroll:
När bältet är korrekt monterat och användaren sitter i rullstolen ska användaren luta sig framåt och åt sidorna för att kontrollera passformen.

Kontrollera följande:
1. Att spännet och justeringsremmarna fungerar normalt.
2. Komfort – kontrollera om några områden orsakar obehag eller skav.
3. Position – om bältet sitter för högt eller för lågt, justera fästpunkterna.
4. Påverkan på annan utrustning – flytta vid behov fästpunkterna.

Denna anvisning medföljer varje 2- eller 4-punktsbälte och ska överlämnas till användaren eller vårdaren samt sparas för framtida användning.

Om du har ytterligare frågor om denna produkt eller denna monteringsanvisning, vänligen kontakta vår kundservice.

Denna och andra monteringsanvisningar finns tillgängliga för nedladdning på my.netti.com

Netti®
Part of MEYRA GROUP

Manufacturer of Netti:

Alu Rehab AS
Bedriftsvegen 23
N-4353 Klepp Stasjon
Norway

post.klepp@meyragroup.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.com